



Täikamm

Kasutusjuhend



Lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke alles. Kasutusjuhend peab olema kättesaadaval kõikidele seadme kasutajatele ja selles olevat teavet tuleb järgida.

1. Sissejuhatus

Beureri täikamm HT 15 võimaldab hõpsalt puhastada peanaha täimunadest ehk tingudest ja peataidest. Täikammis ei ole mingeid kemikaale, mistõttu see on peanahale eriti õrn ning sobib ka väikelastele.

Kuidas täikamm töötab?

Peatäi või tinguga kokkupuutel väljastab seade ohutu elektrilise impulsi, mida inimene ei tunne. Juuste kammimise ajal jäävad täid elektrilaenguga metallist piide külge kinni ja nad eemaldatakse tulemuslikult. Seega on täikamm lihtne, ohutu ja tõhus viis peatäide eemaldamiseks.

2. Seadme komplekti kuuluvad esemed

Täikamm HT 15
Kaitsekate
Puhastuspintsl
1,5 V AA-patarei
See kasutusjuhend

3. Märgid ja sümbolid

Kasutusjuhendis ning seadme ja tarvikute pakendil ja andmeplaadil kasutatakse järgmisi sümboleid.

	HOIATUS!	HOIATUS! märgib keskmise tasemega ohtu, mille eiramine võib põhjustada surma või raske vigastuse.
	TÄHELEPANU!	TÄHELEPANU! märgib väikese tasemega ohtu, mille eiramine võib põhjustada väiksema või mõeldudalt raske vigastuse.
MÄRKUS		MÄRKUS tähistab olulist teavet
		Järgige kasutusjuhendit
		B-tüüpi seade
		Seade tuleb kasutuselt kõrvaldada vastavalt EÜ WEEE (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmete) direktiivile
		Tootja

	Kõrvaldage pakend kasutuselt keskkonnale ohutult.
LOT	Partii number
IP22	Kaitse tahkete võõrkehade eest läbimõelduga 12,5 mm ja suuremad ning vihmapiiskade eest, kui korpus on 15° nurga all
Storage/Transport 	Hoiukoha ja transportimise õhutemperatuur ja niiskus
Operating 	Töökeskkonna õhutemperatuur ja niiskus
CE	CE-märgis tõendab, et toode vastab meditsiiniseadmete direktiivi 93/42/EÜ olulistele nõuetele.

4. Kasutusotstarve

Seade on mõeldud ainult inimeste juuste ning koerte ja kasside karva kammimiseks. Seade on mõeldud ainult eraviisiliseks kasutamiseks. Seadet tohib kasutada vaid ettenähtud eesmärgil ja kasutusjuhendis märgitud viisil. Seadme mittesihipärane kasutamine võib olla ohtlik. Tootja ei võta endale vastutust seadme sobimatust või väärast kasutamisest tuleneva kahju eest.

5. Ohutusmärgused



HOIATUS!

- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kuivadest kammitud juustest.
- Hoidke seade eemal kuumadest pindadest ja kaitske seda ka otsese päikesevalguse eest.
- Kui seadet ei kasutata, pange sellele alati kaitsekate peale.
- Seadme kasutamisel tugevate elektromagnetväljade lähedal (nt mobiiltelefon) võivad tekkida tõrked seadme töös.
- Hoidke pakkematerjale lastele kättesaamatus kohas. Lapsed võivad need suhu panna ja lämbuda. Lämpumisoh!
- Enne seadme kasutamist kontrollige, et seadmel ja selle tarvikutel ei oleks nähtavaid kahjustusi. Kahtluste korral ärge seadet kasutage ja võtke ühendust seadme edasimüüja või klienditeenindusega (aadressi leiate kasutusjuhendist).
- Ärge kasutage seadet vee lähedal ega vees,
- Ärge pange seadet vette ega muusse vedelikku! Seadme sisse ei tohi sattuda niiskust.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Hoidke seade lastele kättesaamatus kohas.
- Lapsed (vähemalt 8-aastaselt) ja isikud, kellel on tavapärases väiksemad füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused või oskused, tohivad seadet kasutada järelevalve all või vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseskirju.
- Lastele tuleb seadme kasutamise ajal alati tagada täiskasvanu järelevalve.
- Pärast igat kasutuskorda puhastage seade hoolikalt puhastuspintsliga - eelkõige juhul, kui seda hakkab kasutama teine isik.
- Kasutamise ajal jälgige, et seade ei puutuks vastu suud, silmi või kõrvu.
- Tundliku peanahaga inimesed võivad seadme kasutamise ajal tunda kerge kipitust või sügelust. See on tavapärase ega ole ohtlik.
- Ärge kasutage seadet isikutel, kellel on südameprobleemid, epilepsia või südamestimulaatorid. Sellised isikud ei tohi seadet ka teistel isikutel kasutada.

- Ärge kasutage seadet sünnimärkidel või katkisel peanahal.
- Naha kokkupuude metallist piidega kasutamise ajal võib põhjustada valulikke, kuid ohutuid elektrilisi impulsse.
- ÄRGE puudutage sisselülitatud seadme metallist piisid.
- Seade vastab ELI meditsiiniseadmete direktiivile 93/42/EMÜ, Saksamaa meditsiiniseadmete aktile (Medizinproduktegesetz) ja Euroopa standardile EN 60601-1-2 (vastavalt standardile IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3) ning selle suhtes kohaldatakse eriliisi ettevaatusabinõusid seoses elektromagnetilise ühilduvusega. Seade sobib kasutamiseks kõikides keskkondades, mis on toodud nendes juhistes, sealhulgas kodune keskkond.



Märkused elektromagnetilise ühilduvuse kohta


- Seade sobib kasutamiseks kõikides keskkondades, mis on toodud nendes juhistes, sealhulgas kodune keskkond.
- Seadme kasutamine võib olla piiratud elektromagnetiliste väljadega. Selle tulemusena võib seadme töös esineda tõrkeid või ekraanile ilmuvaid veateateid.
- Ärge kasutage seda seadet teiste seadmete vahetus läheduses ega teiste seadmete peal, sest see võib põhjustada tõrkeid seadme töös. Kui seadet on siiski vaja eespool toodud viisil kasutada, jälgige nii seda kui ka teisi seadmeid tähelepanelikult ja veenduge, et need töötavad nõuetekohaselt.
- Muude tarvikute kui siintoodud või tootja soovitatud kasutamine võib suurendada elektromagnetilist emissiooni või vähendada seadme elektromagnetilist immuunsust. Selle tulemusena võivad seadme töös tekkida tõrked.
- Eespool toodud teabe eiramisel ei pruugi seade nõuetekohaselt töötada.



Märkused patareide kasutamise kohta

- Kui patareivedelik satub nahale või silma, peske neid põhjalikult puhta veega ning pöörduge viivitamatult arsti poole.
- ⚠ **Lämbumisoht!** Väikelapsed võivad patareid suhu panna ja alla neelata. Patareisid tuleb hoida väikelaste kättesaamatus kohas.
- Järgige polaarsusmärgistusi (+) ja (-).
- Patarei lekkimise korral puhastage patareisahtel kuiva lapiga, kandes seejuures kaitsekindaid.
- Kaitske patareisid liigse kuumuse eest.
- ⚠ **Plahvatusoht!** Ärge visake patareisid tulle. Patareisid ei tohi laadida ega lühisesse ajada.
- Kui te ei kavatse seadet pikemat aega kasutada, võtke patarei patareisahtilist välja.
- Kasutage ainult ettenähtud või nendega võrdväärseid patareisid.
- Vahetage alati kõik patareid korraga.
- Ärge kasutage akusid.
- Ärge võtke patareisid osadeks lahti ega purustage neid.

6. Seadme kirjeldus

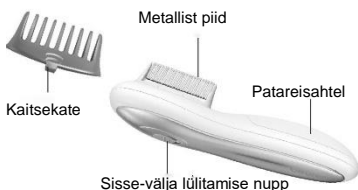

7. Enne esmast kasutamist

Patarei paigaldamine

1. Lükake patareisahtili kate lahti.
2. Sisestage kompleksis olev patarei patareisahtilisse, nagu on näidatud patareisahtili sees oleval joonisel. Patarei

paigaldamisel järgige pooluste +/- märgistust.



3. Sulgege patareisahtel (peate kuulma klõpsu ja tundma, kuidas patareisahtili kate oma kohale lukustub).

8. Kasutamine

Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kuivadel jammel. Enne kasutamist kammige juukseid tavalisel juugata siledaks.

1. Vajutage pöidla ja nimetissõrmega kaitsekatte kõrval asuvatele säikudele, kuni kaitsekate lahti lukustub. Tõmmake kaitsekate ülespoole ja võtke pealt.
2. Lükake sisse-välja lülitamise nupp asendisse "1". Kõlbalt kõrge helitooniga piiks, mis näitab, et seade on sisse lülitatud ja kasutusvalmis.
3. Hoidke seadet peanaha suhtes 45° nurga all. Liigutage seadet aeglaselt läbi juuste juurtest kuni otsteni. Kammige kõik juukseid aeglaselt, hoolikalt ja täielikult läbi.
4. Kui peatäi puutub kokku seadme metallist piidega, kostub piiks. Kui kõrge helitooniga piiksu enam ei kõla, puhastage metallist piid puhastuspintsliga.
5. Seadme kasutamise lõpetamiseks lükake sisse-välja lülitamise nupp asendisse "0". Kõrge helitooniga piiks lülitatakse välja.
6. Puhastage seadet pärast iga kasutuskorda, nagu on kirjeldatud osas "Puhastamine ja hooldustööd".

MÄRKUS

Seadmega saab eemaldada nii täid kui ka tingud (täimand). Kasutage seadet kahe nädala jooksul iga päev, et kõik täid eemaldada.

Täide edaspidiseks vältimiseks soovime kuu aja pärast seadet taas üks või kaks korda nädalas kasutada.

9. Puhastamine ja hooldustööd



TÄHELEPANU!

- Metallist piide paremaks puhastamiseks eemaldage kaitsekate. Puhastage metallist piisid hoolikalt pärast iga kasutuskorda kaasasoleva puhastuspintsliga. Kontrollige, ega metallist piide vahele ole jäänud mingeid jääke.
- Puhastage seadet (v. a metallist piid) pärast kasutamist pehme, veidi niiske lapiga. Väga määrduvad seadme puhastamiseks kasutage kergelt puhastusvahendiga niisutatud lappi. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusaineid.
- Veenduge, et seadmesse ei imbu vett. Kui see peaks juhtuma, võtke patarei välja ja kasutage seadet uuesti alles siis, kui see on täielikult kuivanud.
- Kaitske seadet löökide, niiskuse, kemikaalide, järskude temperatuurimuutuste ja soojusallikate (ahjud, radiaatorid) eest.

10. Korduma kippuvad küsimused

Keda peatäid ohustavad?

Peatäid ohustavad kõiki, mitte ainult lapsi. Peatäide tekkepõhjus ei ole puudulik hügieen.

Kuidas peatäid tekitavad?

Peatäid ei oska lennata ega hüpata, vaid nad roomavad. Peatäid kanduvad edasi otsekontakti kaudu isikult, kellel juba on peatäid (näiteks kahe pea kokkupuutel).

Kuskohast peatäid tulevad?

Tavaliselt ei saada peatäisid koolist. Need rohkem levinud väljaspool kooli.

Keda tuleks kontrollida ja kuidas?

Kui olete saanud hoiatuse, et teie lähikonnas on täid, kontrollige kõiki pereliikmeid vähemalt üks kord nädalas ja teavitage oma sõpru.

Miks on oluline peatäid kohe avastada?

Peatäide avastamiseks korral saate need kohe eemaldada, mis on lihtsam siis, kui täisid on vähem. Samuti on sel juhul

vähsem tõenäosus, et täid kanduvad edasi pereliikmetele ja sõpradele.

11. Kasutuselt kõrvaldamine

Keskkonnakaitse tagamiseks ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud seadmeid olmeprügi hulka. Viige töökõlbmatuks muutunud seade vastavasse kogumis- või ümbertöötlemiskeskusesse. Seadmete kasutuselt kõrvaldamisel tuleb järgida EÜ WEEE-direktiivis (elektrilised ja elektroonilised jäätmed) sätestatud nõudeid. Küsimuste korral võtke ühendust jäätmekäitluse eest vastutava kohaliku asutusega.

Tühjad patareid tuleb viia vastavasse kogumispunkti.

Teil on seadusjärgne kohustus neist ohutult vabaneda.

Kahjulikke aineid sisaldavatel patareidel on alljärgnev märgistus:

Pb = pliid sisaldav patarei, Cd = kaadmiumi sisaldav patarei, Hg = elavhõbedat sisaldav patarei.



12. Tehnilised andmed

• Mudel: HT15	• Kaal u 56 g (ilma patareita)
• Patarei: 1 x 1,5 V AA-tüüpi patarei	• Mõõtmed: 158 x 37 x 50 mm

13. Garantii / teenindus

Beurer GmbH, Soflinger StraRe 218, 89077 Ulm, Saksamaa (edaspidi "Beurer") annab sellele tootele garantii, mille suhtes kohalduvad allpool toodud tingimused ja mis hõlmab järgmist.

Alltoodud garantiitingimused ei mõjuta riiklikke garantiikohustusi, mille müüja seadme ostjale annab.

Beurer tagab, et see toode on töokorras ja kompleksne.

Üleilmne garantiiperiood on 3 aastat, alates uue kasutamata toote ostmisest müüjalt.

Garantii kehtib ainult toodetele, mille ostja on ostanud kui tarbija ja mida ta kasutab ainult eraviisilisel otstarbel oma kodumajapidamises.

Kehtivad Saksamaa seadused.

Kui tootel ilmneb garantiiperioodi jooksul defekte vastavalt alljärgnevatele tingimustele, remondib või vahetab Beurer toote kooskõlas garantiitingimustega tasuta välja.

Kui ostja soovib esitada garantiinõude, peab ta esmalt pöörduma seadme kohaliku edasimüüja poole: vt lisatud klienditeeninduste aadresside nimekiri.

Sealt antakse ostjale edasine teave, kuhu ta toote toimetama peab ja milliseid dokumente selleks vaja on.

Garantiinõude korral tuleb Beurerile või selle volitatud partnerile esitada

- koopia ostuarvest / -tšekist ja
- originaaltoode.

Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:

- toote tavapärasest kasutamisest või tarbimisest tulenev kulumine;
- tootega kaasasolevatele tarvikutele, mis kuluvad või saavad otsa toote sihipärase kasutamise käigus (nt patareid, akud, tihendid, elektroodid, valgusallikad, tarvikud ja nebulisaatori tarvikud);
- kui tooteid on kasutatud, puhastatud, hoiustatud või hooldatud sobimatult ja/või kasutusjuhendis toodud teavet eirates ning kui tooteid on koost lahti võtnud, remontinud või ümber seadistanud ostja või klienditeeninduskeskus, mida Beurer pole selleks volitanud;
- kahjustused, mis tulenevad toote transportimisest tootja ja kliendi vahel või klienditeeninduskeskuse ja kliendi vahel;
- juhul kui toode on ostenud kasutatud kujul;
- kahju, mis tulenevad toote defektist (teatud tingimustel võidakse see siiski hüvitada).

Toote remontimine või väljavahetamine ei pikenda garantiiaega.