


beurer

MG 44




LV Infrasarkanā rokas masāžas ierīce
Lietošanas instrukcija



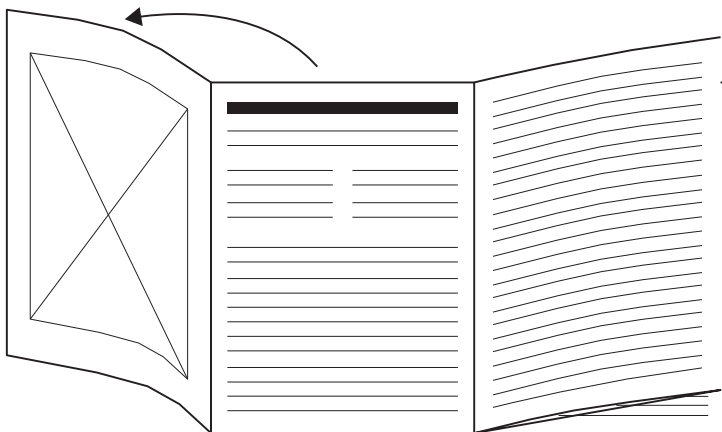

LV Pirms lietošanas instrukcijas izlasīšanas atloki 3. lappusi.

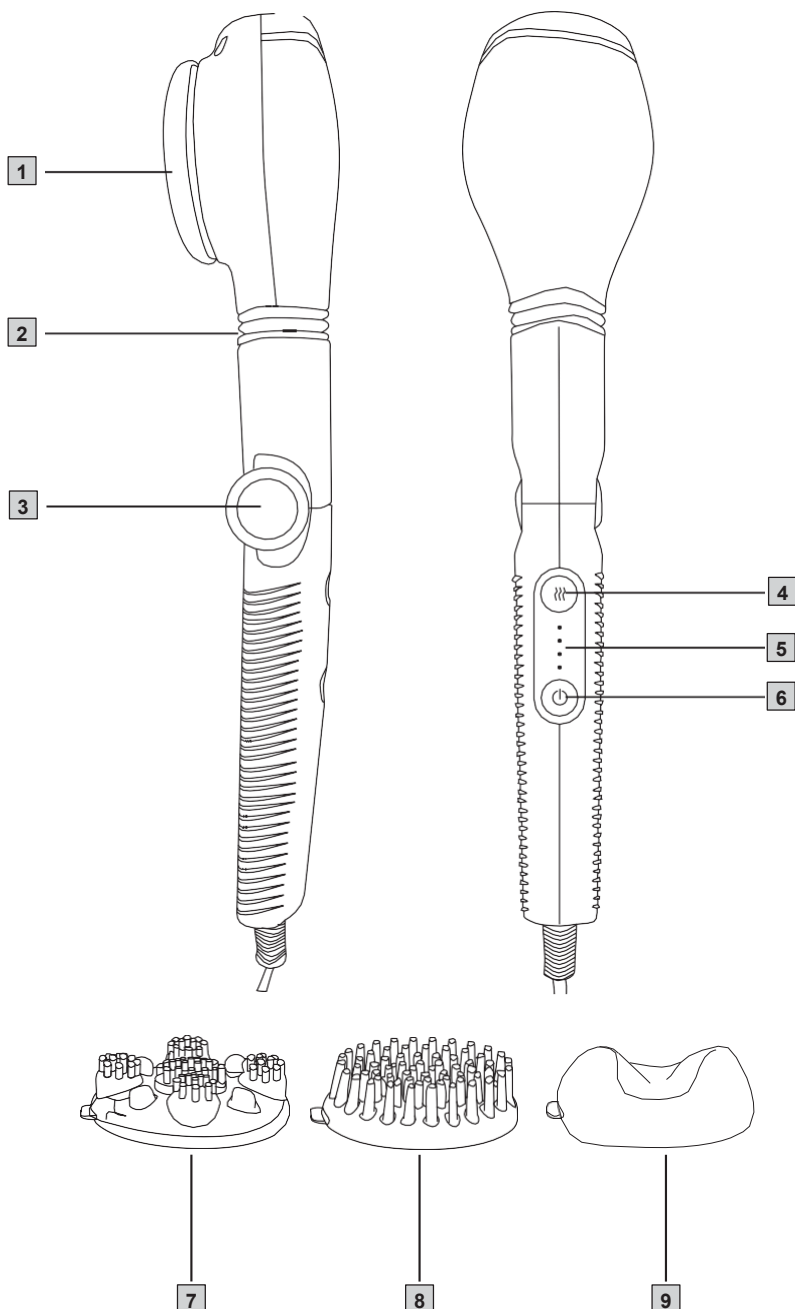



Uzmanīgi izlasiet šos lietošanas norādījumus. Ievērojiet brīdinājumus un drošības piezīmes. Saglabājiet šos norādījumus turpmākai atsaucei. Dariet lietošanas pamācību pieejamu citiem lietotājiem. Ja ierīce tiek nodota tālāk, nododiet nākamajam lietotājam šīs lietošanas instrukcijas.

SATURA RĀDĪTĀJS

1. Iekļauts piegādē	5	7.1 Masāžas piederumi	6
2. Zīmes un simboli	5	7.2 Masāžas sākšana	6
3. Paredzētais mērķis	5	8. Tīrīšana un apkope	7
4. Brīdinājumi un drošības piezīmes	5	9. Utilizācija	7
5. Ierīces apraksts	6	10. Tehniskās specifikācijas	7
6. Sākotnējā lietošana	6	11. Garantija	7
7. Lietošana	6		

BRĪDINĀJUMS

- Ierīce ir paredzēta tikai privātai lietošanai, nevis komerciālai lietošanai.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai nepietiekamu pieredzi vai zināšanām, ja viņi tiek uzraudzīti vai ir instruēti, kā droši lietot ierīci, un pilnībā apzinās no tā izrietošos lietošanas riskus.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
- Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un apkopi bez uzraudzības.

- Ja šīs ierīces tīkla savienojuma kabelis ir bojāts, tas ir jāizmet. Ja to nevar noņemt, utilizējiet ierīci.
- Ierīcei ir karsta virsma. Lietojot ierīci, personām, kas ir jutīgas pret karstumu, jāievēro piesardzība.
- Nekādā gadījumā ierīci nedrīkst atvērt vai remontēt saviem spēkiem, jo pēc tam vairs nav iespējams garantēt nevainojamu funkcionalitāti. Ja šis noteikums netiks ievērots, garantija zaudēs spēku.

1. IEKĻAUTS PIEGĀDĒ

Pārbaudiet, vai kartona iepakojuma ārpusē ir neskarta, un pārliecinieties, ka ir piegādāts viss saturs. Pirms lietošanas pārliecinieties, ka ierīcei vai piederumiem nav redzamu bojājumu un ka viss iepakojuma materiāls ir noņemts. Ja jums ir šaubas, nelietojiet ierīci un sazinieties ar savu mazumtirgotāju vai norādīto klientu apkalpošanas adresi.

- 1 infrasarkanā staru rokas masāžas ierīce
- 3 maināmi masāžas piederumi
- 1 šīs lietošanas instrukcijas eksemplārs

2. ZĪMES UN SIMBOLI

Uz ierīces, šajā lietošanas instrukcijā, uz iepakojuma un uz ierīces tipa plāksnītes ir izmantoti šādi simboli:

 BRIESMAS	Norāda uz draudošām briesmām. Ja no tām neizvairās, tās var izraisīt nāvi vai nopietnas traumas.
 BRĪDINĀJUMS	Norāda uz potenciāli nenovēršamu apdraudējumu. Ja no tā neizvairās, pastāv nāves vai nopietnu traumu gūšanas risks.
 UZMANĪBU	Norāda uz potenciāli nenovēršamu apdraudējumu. Ja no tā neizvairās, var rasties nelielas vai nebūtiskas traumas.
 PIEZĪME	Norāda uz potenciāli kaitīgu situāciju. Ja no tās neizvairās, ierīce vai kaut kas tās tuvumā var tikt bojāts.
 Informācija par produktu	Piebilde par svarīgu informāciju
 Izlasiet norādījumus	
 Likvidējiet ierīci saskaņā ar EK direktīvu - EEIA (elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi).	
 Produkti uzskatāmi atbilst EAEU Tehnisko noteikumu prasībām	
 CE marķējums	Šis produkts atbilst piemērojamo Eiropas Savienības un valsts direktīvu prasībām.
 Atdaliet produktu un iepakojuma elementus un utilizējiet tos saskaņā ar vietējiem noteikumiem.	
 Marķējums iepakojuma identificēšanai. A = Materiāla kods, B = Materiāla numurs: 1-7 = Plastmasas, 20-22 = papīrs un kartons	
 Atbilstības novērtējuma marķējums Apvienotajā Karalistē	
 II aizsardzības klases ierīce	Ierīcei ir dubulta izolācija, tāpēc tā atbilst 2. aizsardzības klasei
 Importētāja simbols	
 Ražotājs	
 Lietošanai tikai telpās	

3. PAREDZĒTAIS MĒRĶIS

Šī ierīce ir paredzēta atsevišķu cilvēku ķermeņa daļu masāžai. Tā nevar aizstāt medicīnisko ārstēšanu. Nelietojiet masāžas ierīci, ja uz jums attiecas viens vai vairāki no šiem brīdinājumiem. Ja neesat pārliecināts, vai masāžas ierīce ir jums piemērota, lūdzu, konsultējieties ar ārstu.

 BRĪDINĀJUMS

Neizmantojiet masāžas ierīci

- uz dzīvniekiem
- ja jums ir medicīniska patoloģija vai trauma masējamajā zonā (piemēram, trūce, valējas brūces),
- nekādā gadījumā neveiciet masāžu sirds apvidū, ja lietojat elektrokardiostimulatoru. Šādā gadījumā vispirms konsultējieties ar ārstu, tostarp par citu ķermeņa daļu masāžu,
- ja jums ir pietūkusi, apdedzināta, iekaisusi vai bojāta āda un ķermeņa daļas,
- uz iegriezumiem, kapilāriem, varikozām vēnām, pinnēm, kuperozas ādas, ja jums ir herpes vai citas ādas slimības,
- grūtniecības laikā,
- uz sejas (acīm), balsenes vai citām īpaši jutīgām ķermeņa daļām,
- jebkuros apstākļos, guļot,
- pēc medikamentu vai alkohola lietošanas (traucēta uztvere),
- transportlīdzeklī,
- kaunuma zonā.

Pirms masāžas ierīces lietošanas konsultējieties ar ārstu, jo īpaši,

- ja jums ir smaga slimība,
- ja jums ir elektrokardiostimulators, implantī vai citi palīgīdzekļi,
- ja jums ir tromboze,
- ja jums ir cukura diabēts,
- ja jūs ciešat no sāpēm, kuru cēlonis nav zināms.

Ierīce ir paredzēta tikai mērķiem, kas aprakstīti šajā lietošanas instrukcijā. Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies nepareizas vai neuzmanīgas lietošanas rezultātā.

4. BRĪDINĀJUMI UN DROŠĪBAS PIEZĪMES

Uzmanīgi izlasiet šos lietošanas norādījumus. Norādījumu neievērošana var izraisīt miesas bojājumus vai materiālu kaitējumu.

 BRĪDINĀJUMS

Sargājiet iepakojuma materiālu no bērniem. Pastāv nosmakšanas risks.

Elektrošoka risks

 BRĪDINĀJUMS

Tāpat kā ar jebkuru elektroierīci, lietojiet šo masāžas ierīci uzmanīgi un piesardzīgi, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena briesmām. Tāpēc ievērojiet šādas lietošanas instrukcijas:

- Izmantojiet šo ierīci tikai ar strāvas spriegumu, kas norādīts uz ierīces.
- Nekad nelietojiet ierīci, ja tai vai tās piederumiem ir redzamas bojājumu pazīmes.
- Nelietojiet ierīci vētras laikā.

Bojājumu vai darbības kļūmju gadījumā nekavējoties izslēdziet ierīci un, ja piemērojams, atvienojiet to no elektrotīkla kontaktlīdzdas. Nevelciet aiz elektrotīkla kabeļa vai ierīces, lai atvienotu kontaktdakšu no kontaktlīdzdas. Nekad neturiet ierīci vai nenesiet to aiz barošanas vada. Netuviniet kabēļus karstām virsmām. Nekad neatveriet ierīci.

Pārliecinieties, ka masāžas ierīce, kontaktdakša un kabelis nesaskaras ar ūdeni vai citiem šķidrumiem.

Tāpēc izmantojiet ierīci tikai

- sausās iekštelpās,
- ar sausām rokām,
- nekad neizmantojiet ierīci vannā, dušā vai piepildītas izlietnes tuvumā,
- nekad neizmantojiet ierīci peldbaseinā, džakuzi vai saunā,
- nekad neizmantojiet ierīci ārpus telpām.

Nekad neaizietiet ierīci, kas ir iekritusi ūdenī. Nekavējoties atvienojiet kontaktdakšu.

Nelietojiet ierīci, ja tā vai tās piederumi ir redzami bojāti. Nenometiet ierīci un nepakļaujiet to nekādiem triecieniem.

Remonts



Elektroierīču remontu drīkst veikt tikai speciālisti. Nepareizs remonts var pakļaut lietotājus ievērojamām briesmām. Lai veiktu remontdarbus, lūdz, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu vai pilnvarotu mazumtirgotāju.

Pastāv aizdegšanās risks.



Nepareizi lietojot ierīci vai ignorējot šos lietošanas norādījumus, pastāv aizdegšanās risks.

Tāpēc masāžas ierīce jādarbina šādi:

- Nekad nedarbiniet to ilgāk par 20 minūtēm. Pirms atkārtotas lietošanas ļaujiet ierīcei atdzist vismaz 15 minūtes.
- Vienmēr uzraugiet ierīces lietošanu, it īpaši, ja tuvumā ir bērni. Nekad neizmantojiet ierīci zem pārsega, piemēram, segas, zem spilvena u.c.

Lietošana



Ierīce ir jāizslēdz un jāatvieno pēc katras lietošanas reizes un pirms tīrīšanas.

Pārliecinieties, ka ierīce nevar iekļerties matī. Valkājiet matu tīkliņu, ja nepieciešams.

- Izvairieties no saskares ar smailiem vai asiem priekšmetiem.
- Nesalieciet kabeli.
- Sargājiet ierīci no siltuma avotiem, kas nonāk pārāk tuvu ierīcei, piemēram, cepeškrāsnīm, sildītājiem vai tiešiem saules stariem.
- Nekad neievietojiet priekšmetus ierīcē caur atverēm.
- Noņemot vai piestiprinot masāžas piederumus, izslēdziet ierīci.

5. IERĪCES APRAKSTS

Saistītie zīmējumi ir parādīti 3. lappusē.

- 1 Masāžas virsma ar infrasarkanu gaismu
- 2 Masāžas galvas savienojums (pagriež par 180°)
- 3 Spiedpoga roktura regulēšanai
- 4 Sildīšanas poga
- 5 LED displejs
- 6 IESL./IZSL. poga
- 7 Piederums ar izvirdījumiem
- 8 Sukas piederums
- 9 U veida piederums

6. SĀKOTNĒJĀ LIETOŠANA

- Noņemiet iepakojumu.
- Pārbaudiet, vai ierīce, kontaktdakša un kabelis nav bojāti.
- Pievienojiet ierīci elektrotīklam. Ierīce ir gaidstāves režīmā (LED displeja apakšējā gaismas diode ("Lo") 5 sāk mirgot zilā krāsā).
- Pārliecinieties, ka tīkla kabelis nerada pakļūšanas risku.

7. LIETOŠANA

7.1 Masāžas piederumi

Masāžu var veikt **ar masāžas piederumu vai bez** tā. Lai to izdarītu, izvēlieties masāžas piederumu pēc savas izvēles. Izmantojot papildu sildīšanas funkciju, uzstādiēt masāžas piederumi traucē termisko iedarbību. Pievienojot masāžas piederumu, ierīce ir jādarbina bez siltuma.

Ierīcei ir trīs masāžas piederumi.

Piederums ar izciļņiem	Sukas piederumus	U formas piederums
Ideāli piemērots lielākām ķermeņa zonām.	Ideāli piemērots lielākām ķermeņa zonām.	Ideāli piemērots ķermeņa zonām kaulu vai cīpslu tuvumā, piemēram, mugurkaulam, Ahilleja cīpslai.


7.2 Masāžas sākšana

Ierīcei ir automātiskās izslēgšanas funkcija, un tā automātiski izslēdzas pēc 20 darbības minūtēm.

1. Ja vēlaties, pievienojiet masāžas piederumu infrasarkanajai/masāžas virsmai [1].
2. Izmantojiet kustīgo savienojumu [2] un spiedpogu [3], lai iestatītu vēlamo leņķi.
3. Iespraudiet kontaktdakšu piemērotā kontaktgldā. -> Apakšējais LED indikators ("Lo") LED displejā [5] sāk mirgot zilā krāsā. Ierīce ir gaidīšanas režīmā un ir gatava lietošanai.
4. Īsi nospiediet IESL./IZSL. pogu [6]. -> Apakšējais LED indikators ("Lo") LED displejā [5] iedegas un deg. Ierīce sāk vibrēt zemā intensitātē.
5. Izvēlieties vēlamo masāžas iestatījumu, īsi nospiežot IESL./IZSL. pogu [6]. -> LED displejā [5] iedegas pašreizējās masāžas iestatījums.

"Lo" = vibrācija zemas intensitātes līmenī
"Hi" = vibrācija augstas intensitātes līmenī
"P" = Vibrāciju masāžas programma – lēnas vibrācijas palielinās un samazinās (kā vilnis)

6. Izmantojiet vienu vai abas rokas, lai virzītu ierīci pa masējamo ķermeņa zonu. Jūs varat sēdēt, stāvēt vai gulēt un varat izmantot ierīci, lai masētu sevi vai citu personu. Masāžas intensitāti var mainīt, piespiežot masāžas ierīci stingrāk vai maigāk. Nemasājiēt nevienu ķermeņa daļu ilgāk par 3 minūtēm; pēc šī laika pārejiet uz citu ķermeņa daļu.

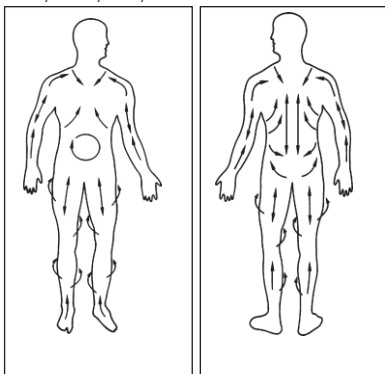

Ķermeņa priekšpuse

Ķermeņa aizmugure

7. Lai pārslēgtu ierīci gaidstāves režīmā, nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu IESL./IZSL. pogu [6]

Apakšējā gaismas diode ("Lo") LED displejā sāk mirgot zilā krāsā

8. Pēc katras lietošanas reizes atvienojiet kabeli no kontaktlīdždas.

Siltuma funkcija

i Jūs varat izmantot sildīšanas funkciju atsevišķi vai kopā ar vibrācijas funkciju. Izmantojot papildu sildīšanas funkciju, uzstādītie masāžas piederumi traucē termisko iedarbību. **Sildīšanas funkciju izmantojiet tikai bez masāžas piederumiem.**

1. Lai ieslēgtu sildīšanas un vibrācijas funkciju, nospiediet siltuma pogu [4], kamēr vibrācijas funkcija ir aktīva.
-> Masāžas virsma sāk sasilt. LED displejā [5] izgaismojas H sarkanā krāsā. Vēlreiz nospiediet siltuma pogu [4], lai izslēgtu sildīšanu.
2. Lai izmantotu sildīšanas funkciju bez vibrācijas, piespiediet un pieturiet IESL./IZSL. pogu [6] 2 sekundes, lai pārietu gaidīšanas režīmā. Gaidīšanas režīmā nospiediet sildīšanas pogu [4].
-> Masāžas virsma sāk sasilt. LED displejā [5] izgaismojas H sarkanā krāsā. Pēc pāris minūtēm ierīce ir uzsilusi un gatava lietošanai.
3. Nospiediet sildīšanas pogu [4], lai izslēgtu infrasarkanā gaismu.
4. Tagad esat gaidstāves režīmā.

8. TĪRĪŠANA UN APKOPE

Tīrīšana



- Katru reizi pirms tīrīšanas izslēdziet ierīci.
- Tīriet ierīci tikai ar viegli mitru drānu.
- Notīriet ierīci, izmantojot tikai norādītās metodes. Ierīcē vai piederumos nekādā gadījumā nedrīkst iekļūt šķidrums.
- Neizmantojiet ierīci, kamēr tā nav pilnībā izžuvusi.
- Netīriet ierīci trauku mazgājamā mašīnā!
- Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai cietas suku. Pirms tīrīšanas atvienojiet strāvas kontaktdakšu.

Noslaukiet ierīci ar mitru drānu. Masāžas piederumus var tīrīt ar siltu ziepju ūdeni. Izmantojiet tikai saudzīgus mājāsaimniecības tīrīšanas līdzekļus.

Nelietojiet infrasarkanā staru masāžas ierīci, kamēr tā nav pilnībā nožuvusi.

Apkope

Ja neplānojat ierīci izmantot ilgu laiku, iesakām to uzglabāt oriģinālajā iepakojumā sausā vidē, pārliedzinoties, ka to nenoslogo papildu priekšmeti.

9. UTILIZĀCIJA

Lai aizsargātu vidi, neizmetiet ierīci kopā ar sadzīves atkritumiem. Utilizējiet ierīci piemērotā vietējā savākšanas vai pārstrādes punktā jūsu valstī.

Ievērojiet vietējos noteikumus par materiālu iznīcināšanu. Likvidējiet ierīci saskaņā ar EK direktīvu - EEIA (elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi). Jautājumu gadījumā sazinieties ar vietējām iestādēm, kas atbildīgas par atkritumu likvidēšanu. Nolietoto ierīču savākšanas punktu atrašanās vietu varat noskaidrot no vietējām iestādēm.

10. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Strāvas padeve	220–240 V~, 50–60 Hz, 6 W
Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā	0,2 W
Izmēri	Aptuveni 38,5 cm x 8 cm x 7,2 cm (bez pielikumiem)
Svars	419 g (bez piederumiem)

Var tikt veiktas tehniskas izmaiņas

11. GARANTĪJA

Sīkāku informāciju par garantiju un garantijas nosacījumiem var atrast pievienotajā garantijas brošūrā.



Uzmanību: ja infrasarkanā staru/masāžas virsma tiek uzsildīta salīdzinoši ilgu laiku bez saskares ar ādu, jums tā var šķist nepatīkami karsta. Tāpēc pirms saskares ar ķermeni pārbaudiet infrasarkanās/masāžas virsmas temperatūru ar pirkstu galiem. Ja tā ir pārāk karsta, izslaidīga infrasarkanās gaismas izslēgšana var samazināt temperatūru.

Izplatītājs:

Sandmani Grupi AS,
Laki pōik 6,
12919 Tallinn,
Estonia
www.sandman.ee