

beurer


MG 44




LT Rankinis masažuoklis su infraraudonųjų spindulių funkcija

Naudojimo instrukcija



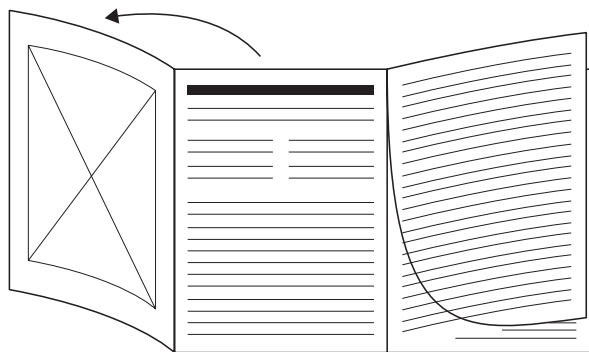

LT Prieš pradėdami skaityti naudojimo instrukcijas, atverskite 3 puslapį.

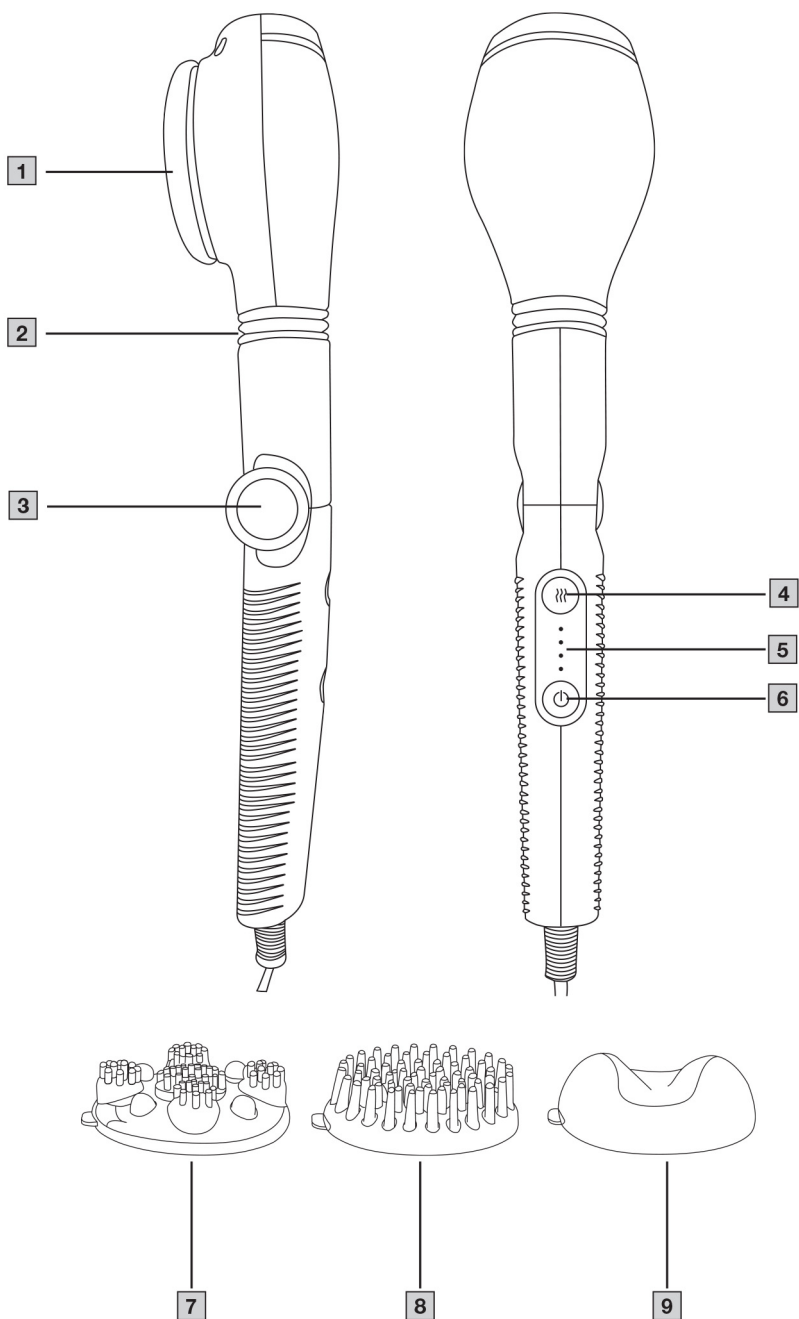



Atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir išsaugokite ją vėlesniam naudojimui, pasirūpinkite, kad naudojimo instrukcija būtų prieinama kitiems vartotojams ir sekite jos nurodymus.

TURINYS

1. Pakuotės turinys.....	5	7. Naudojimas.....	7
2. Simbolių paaiškinimas	5	8. Valymas ir priežiūra	7
3. Naudojimas pagal paskirtį	5	9. Utilizavimas.....	9
4. Įspėjimai ir saugos nuorodos.....	6	10. Techniniai duomenys.....	9
5. Prietaiso aprašymas.....	7	11. Garantija/aptašavimas.....	9
6. Pasirengimas darbui.....	7		



ĮSPĖJIMAS

- Prietaisas skirtas tik buitiniam/ asmeniniam, o ne komerciniam naudojimui.
- Šiuo prietaisu gali naudotis vyresni nei 8 metų vaikai ir žmonės su susilpnėjusiais fiziniais, jutimo ar protiniais gebėjimais, jei jie yra prižiūrimi arba yra instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Neleiskite vaikams valyti prietaisą ir atlikti priežiūros darbus, nebent jie yra prižiūrimi.
- Jei prietaiso maitinimo kabelis pažeistas, reikia išmesti kabelį. Jei kabelio negalima nuimti ir pakeisti, reikia išmesti prietaisą.
- Naudojimo metu prietaiso paviršius įkaista. Asmenys, nejautrūs karščiui, turėtų būti ypač atsargūs.
- Jokiu būdu neardykite prietaiso, nebandykite jo taisyti savarankiškai, nes tokiu atveju negarantuojamas nepriekaištingas prietaiso veikimas. Nesilaikant šio reikalavimo, prarandama teisė į prietaiso garantiją.

1. PAKUOTĖS TURINYS

Patikrinkite, ar nepažeista kartoninė pakuotė. Prieš naudodami patikrinkite, ar nėra matomų prietaiso ir jo priedų pažeidimų.

- 1 rankinis masažuoklis su infraraudonųjų spindulių funkcija
- 3 priedai
- 1 naudojimo instrukcija

2. SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAS

Šioje naudojimo instrukcijoje, ant pakuotės ar tipinėje prietaiso (bei jo priedų) lentelėje naudojami šie simboliai:

	PAVOJUS
Įspėja apie gresiantį pavojų. Jei nepaisoma šio įspėjimo, kyla pavojus gyvybei arba sveikatai.	
	ĮSPĖJIMAS
Įspėja apie galimą pavojų gyvybei ar sveikatai.	
	DĖMESIO
Įspėja apie galimą pavojų patirti traumą.	
	PASTABA
Nurodo, kad galima patirti materialinę žalą.	

	Perskaitykite naudojimosi instrukciją.
	Informacija apie gaminį Pateikiama svarbi informacija.
	CE ženklas užtikrina, kad šis gaminys atitinka ES ir nacionalines direktyvas.
	Naudoti tik uždaroje patalpose.
	Gamintojas
	Pašalinkite pakuotę ir išmeskite laikydamiesi vietinių atliekų tvarkymo taisyklių.

	Gaminiai atitinka visus Eurazijos ekonominės sąjungos (EAEU) suderintų techninių reglamentų reikalavimus.
	Atitiktis įvertinimo žymėjimas Jungtinėje Karalystėje.
	Prietaisas turi dvigubą apsaugą ir atitinka 2 apsaugos klasę.
	Ženklintas pakavimo medžiagai identifikuoti. A = medžiagos santrumpa, B = medžiagos numeris: 1–7 = plastikas, 20–22 = popierius ir kartonas
	Nebenaudojamą prietaisą išmeskite vadovaudamiesi ES direktyva – WEEE (elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo direktyva).
	Importuotojo simbolis

3. NAUDOJIMAS PAGAL PASKIRTĮ

Šis prietaisas skirtas atskirų žmogaus kūno dalių masažui. Jis negali pakeisti medicininio gydymo. Nenaudokite raumenų masažuoklio, jei jums tinka vienas ar keli iš išvardytų įspėjimų. Jei nesate tikri, ar masažuoklis jums tinka, kreipkitės į gydytoją.

ĮSPĖJIMAS

Nenaudokite masažuoklio:

- ant gyvūnų,
- jei jaučiate skausmą ar esate patyrę traumą masažuojamose kūno vietose (pavyzdžiui, jums diagnozuota tarpslankstelinio disko išvarža, turite atvirą žaizdą);
- jei turite širdies stimuliatorių - draudžiama masažuoti širdies plotę, dėl kitų kūno dalių masažo pasitarkite su gydytoju;
- ant patinusios, nudegusios ar pažeistos odos ar kitos kūno vietos,
- jei esate įsipjovę, sergate venų varikoze, kuperoze, pūsleline, įsiplėtę kapiliarai, oda yra spuoguota arba sergate kitomis odos

- ligomis;
- nėštumo metu,
- ant veido (akių), gerklų ar kitų ypač jautrių kūno vietų,
- miego metu,
- pavartojus vaistų ar alkoholio (sutrikusi reakcija);
- transporto priemonėje;
- intymioje zonoje.

Prieš naudodami masažuoklį, turėtumėte pasikonsultuoti su gydytoju:

- jeigu sergate sunkia liga;
- jei turite širdies stimuliatorių, implantus ar kitus medicinos prietaisus;
- jeigu sergate tromboze;
- jeigu sergate cukriniu diabetu;
- jeigu jaučiate skausmą, kurio priežastis nežinoma.

Prietaisas skirtas naudoti tik šioje naudojimo instrukcijoje nurodytais tikslais. Gamintojas neatsako už žalą, padarytą dėl netinkamo ar neatsargaus prietaiso naudojimo.

4. ĮSPĖJIMAI IR SAUGOS NUORODOS

Prašome atidžiai perskaityti šias naudojimo instrukcijas. Nesilaikant toliau pateiktos informacijos, galite susižaloti ar patirti materialinę žalą.



ĮSPĖJIMAS

Pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Gali kilti uždegimo pavojus.

Elektros smūgio pavojus



ĮSPĖJIMAS

Kaip ir su kiekvienu elektriniu prietaisu, su šiuo masažuokliu reikia elgtis atsargiai ir dėmesingai, kad būtų išvengta elektros smūgio pavojus.

Todėl:

- prieš naudodami prietaisą, įsitikinkite, kad tinklo įtampa atitinka prietaiso gamyklinėje lentelėje nurodytą įtampą;
- niekada nenaudokite prietaiso, jei pastebėjote, kad pats prietaisas ar jo priedai yra pažeisti;

- niekada nesinaudokite perkūnijos metu; Atsiradus gedimui ar veikimo sutrikimui, nedelsdami išjunkite prietaisą ir, jei reikia, ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo, niekada netraukite už maitinimo kabelio ar už paties prietaiso. Niekada nelaikykite ir neneškite prietaiso už maitinimo kabelio. Laikykite kabelį toliau nuo karštų paviršių. Draudžiama ardyti prietaisą.

- Pasirūpinkite, kad prietaisas, kabelis ir kištukas nesiliestų su vandeniu ar kitais skysčiais.

Todėl naudokite prietaisą:

- tik sausose patalpose;
- tik sausomis rankomis;
- nenaudokite vonioje, duše ar šalia pripildyto praustuvo;
- nenaudokite baseine, sūkurinėje vonioje ar saunoje;
- lauke.

Draudžiama imti į rankas į vandenį įkritusį prietaisą. Nedelsdami ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo.

Niekada nenaudokite prietaiso, jei ant jo ar jo priedų yra matomi pažeidimai. Saugokite prietaisą nuo smūgių ir kritimo.

Remontas



SVARBU

Elektros prietaisus remontuoti gali tik specialistai. Draudžiama ardyti prietaisą ar bandyti patiemis jį taisyti. Jei prietaisui reikalingas remontas, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba arba įgaliootuoju pardavėju.

Gaisro pavojus



ĮSPĖJIMAS

Jei prietaisas naudojamas netinkamai arba nesilaikant šios naudojimo instrukcijos nuorodų, gali kilti gaisro pavojus.

Todėl naudokite prietaisą:

- ne ilgiau kaip 20 minučių (perkaitimo pavojus) ir prieš pakartotinai naudodami, leiskite prietaisui atvėsti ne mažiau kaip 15 minučių,
- niekada nepalikite prietaiso be priežiūros, ypač jei šalia yra vaikai.

- niekada neuždenkite naudojamo prietaiso, pvz., antklode ar pagalve.

Prietaiso priežiūra

PASTABA

Po kiekvieno naudojimo ir prieš valymą, išjunkite prietaisą ir atjunkite jo maitinimą iš tinklo.

- Stebėkite, kad į prietaisą neįstrigtų plaukai. Jei reikia, užsidėkite plaukų tinklėlį.
- Venkite kontakto su aštriais ar smailiais daiktais.
- Nelankstykite elektros kabelio.
- Laikykite prietaisą toliau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, orkaitės, šildytuvų ar tiesioginių saulės spindulių.
- Draudžiama į prietaiso angas kišti bet kokius daiktus.
- Išjunkite prietaisą, jei nuimami arba montuojami masažo antgaliai.

5. PRIETAISO APRAŠYMAS

Susiję piešiniai pateikti 3 puslapyje.

- 1 Masažo paviršius su infraraudonųjų spindulių funkcija
- 2 Pasukama jungtis masažo galvutei (sukasi 180°)
- 3 Rankenos padėties reguliavimo mygtukas
- 4 Šildymo mygtukas
- 5 Šviesos diodų indikatorius
- 6 Mygtukas ĮJUNGTI/IŠJUNGTI
- 7 Antgalis su kauburėliais
- 8 Antgalis - šepetėlis
- 9 U formos antgalis

6. PASIRENGIMAS DARBUI

- Išpakuokite prietaisą.
- Patikrinkite, ar prietaisas, kištukas ir kabelis nėra pažeisti.
- Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo. Prietaisas yra budėjimo režime (šviesos diodų indikatoriaus **5** apatinis šviesos diodas (Lo) pradės mirksėti mėlyna spalva).
- Kabelį padėkite taip, kad niekas į jį neįsispainiotų ir nesukluptų.

7. NAUDOJIMAS

7.1 Masažo antgaliai



Masažas gali būti atliekamas **su masažo antgaliu arba be jo**.

Masažo antgalį galite pasirinkti pagal poreikį. Kai įjungiamą papildoma šildymo funkcija, masažo antgaliai blokuoja šilumą. Todėl, kai prietaisą naudojate su masažo antgaliu, nesi- naudokite šildymo funkcija.

Prietaisas turi 3 antgalius.

Antgalis su kauburėliais	Antgalis - šepetėlis	U formos antgalis
Tinka didelių kūno dalių masažui.	Tinka didelių kūno dalių masažui.	Tinka kūno dalių, esančių šalia kaulų ar sausgyslių, pavyzdžiui, stuburo, Achilo sausgyslės, masažui.

7.2 Masažo pradžia



Prietaisas turi automatinio išjungimo funkciją ir automatiškai išsijungia po 20 minučių veikimo.

1. Jei reikia, uždėkite masažo antgalį ant infraraudonųjų spindulių/masažo paviršiaus **1**.
2. Nustatykite reikiamą kampą ant jungties **2** ir mygtuko **3**.
3. Maitinimo kabelį prijunkite prie tinkamo elektros lizdo.
 - ↳ Šviesos diodų indikatoriaus **5** apatinis šviesos diodas (Lo) pradės mirksėti mėlyna spalva. Prietaisas yra budėjimo režime ir paruoštas darbui.
4. Paspauskite ir atleiskite mygtuką ĮJUNGTI/IŠJUNGTI **6**.


↳ Šviesos diodų indikatoriaus [5] apatinis šviesos diodas (Lo) pradės mirksėti mėlyna spalva. Prietaisas pradės vibruoti mažu intensyvumu.

5. Trumpai paspausdami mygtuką ĮJUNGTI/ IŠJUNGTI [6] ir pasirinkite norimą masažo režimą.


↳ Šviesos diodų indikatoriuje [5] pradės šviesti pasirinkto masažo režimo šviesos diodas.

Lo	=	Mažas vibracijos intensyvumas
Hi	=	Didelis vibracijos intensyvumas
P	=	Masažo funkcija „Vibracija“ – lėtas vibracijos intensyvumo didėjimas ir mažėjimas (bangos judesio imitavimas)

6. Laikydami prietaisą viena arba abiem rankomis, prispauskite jį prie kūno dalies, kurią norite masažuoti. Galite stovėti, sėdėti arba gulėti ir masažuoti save arba kitą asmenį. Masažo intensyvumas kinta priklausomai nuo spaudimo jėgos, kuria spaudžiate prietaisą. Masažuokite tam tikrą kūno dalį ne ilgiau kaip 3 minutes, po to pereikite prie kitų kūno dalių.
7. Norėdami perjungti prietaisą į budėjimo režimą, paspauskite mygtuką ĮJUNGTI/

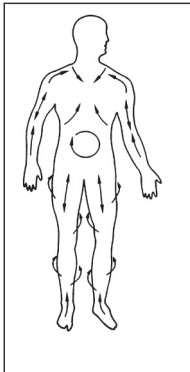

Priekis

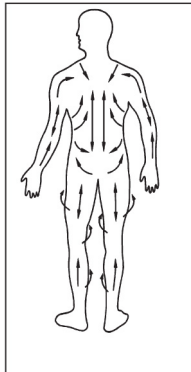

Nugara

IŠJUNGTI [6] ir laikykite jį nuspaustą 2 sekundes.

↳ Šviesos diodų indikatoriaus [5] apatinis šviesos diodas (Lo) pradės mirksėti mėlyna spalva.

8. Po kiekvieno naudojimo ištraukite kabelį iš elektros lizdo.

Šildymo funkcija



Šildymo funkciją galima naudoti atskirai arba kartu su vibracija. Naudojant šildymo funkciją, pritvirtinti masažo antgaliai blokuoja šilumą.

Šildymo funkciją naudokite be masažo antgalių.

1. Norėdami įjungti šildymo funkciją kartu su jau įjungta vibracija, paspauskite šildymo mygtuką [4].
- ↳ Masažo paviršius pradės šilti. Šviesos diodų indikatoriuje [5] raudona spalva pradės šviesti raidė H. Pakartotinai paspaudus šildymo mygtuką [4], šildymas išsijungs.
2. Norėdami naudoti šildymo funkciją atskirai (be vibracijos funkcijos), paspauskite mygtuką ĮJUNGTI/IŠJUNGTI [6] ir laikykite jį nuspaustą 2 sekundes. Prietaisas pereis į budėjimo režimą. Budėjimo režime paspauskite šildymo mygtuką [4].
- ↳ Masažo paviršius pradės šilti. Šviesos diodų indikatoriuje [5] raudona spalva pradės šviesti raidė H. Po kelių minučių paviršius pakankamai įšils ir bus paruoštas naudoti.
3. Norėdami išjungti infraraudonųjų spindulių funkciją, vėl paspauskite šildymo mygtuką [4].
4. Prietaisas vėl pereis į budėjimo režimą.

PASTABA

Dėmesio! Ilgai kaitinant infraraudonųjų spindulių/masažo paviršių [1] be sąlyčio su oda, temperatūra gali pakilti tiek, kad jums kils nemalonūs pojūčiai. Todėl rekomenduojama visada iš anksto patikrinti infraraudonųjų spindulių/masažo paviršiaus [1] temperatūrą pirštų galiukais. Norėdami sumažinti temperatūrą, galite trumpam išjungti infraraudonųjų spindulių funkciją.

8. Valymas ir priežiūra

Valymas



- Kiekvieną kartą prieš valydami prietaisą, atjunkite jį nuo elektros tinklo.
- Prietaisą valykite tik šiek tiek drėgna šluoste.
- Prietaisą valykite tik nurodytu būdu. Saugokite, kad į prietaiso vidų nepatektų skysčių.
- Nesinaudokite prietaisu ar priedais, kol visos dalys visiškai neišdžius.
- Neplaukite prietaiso indaplovėje.
- Nenaudokite abrazyvinių valymo priemonių ar kietų šepetėlių! Prieš valydami, ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo.

Nuvalykite prietaisą drėgna šluoste. Masažo antgaliams valyti galite naudoti šiltą muiluotą vandenį. Naudokite tik švelnias buitines valymo priemones.

Prietaisą vėl galite naudokite, kai jis visiškai išdžius.

Priežiūra

Jei neplanuojate prietaisu naudotis ilgesnį laiką, rekomenduojame jį laikyti originalioje pakuotėje, sausoje vietoje, neapkrovus kitais daiktais.

9. UTILIZAVIMAS

Siekiant tausoti gamtą, sugedusius arba nebenaudojamus prietaisus reikia atiduokite į buitinės technikos surinkimo arba perdirbimo punktą. Nebenaudojamą prietaisą neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis.

Nebenaudojamą prietaisą išmeskite vadovaudamiesi ES direktyva – WEEE (elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo direktyva).

Jei turite klausimų, kreipkitės į vietos komunalinę tarnybą, atsakingą už atliekų tvarkymą.

10. TECHNINIAI DUOMENYS

Maitinimas iš tinklo	220–240 V~, 50–60 Hz, 6 W
Matmenys	apie 38,5 x 8 x 7,2 cm (be priedų)
Svoris	apie 419 g (be priedų)
Energijos suvaržymas budėjimo režimu	0,2 W

Galimi techniniai pakeitimai.

11. GARANTIJA/ APTARNAVIMAS

Išsamią informaciją apie garantiją ir garantines sąlygas rasite pridedamame garantiniame lapelyje.

Platintojas:

"Sandmani Grupi AS", Laki pöik 6, 12919 Talinas, Estija ; www.sandman.ee



"Beurer GmbH" • Söflinger g. 218 • 89077 Ulmas, Vokietija • www.beurer.com
www.beurer-gesundheitstratgeber.com • www.beurer-healthguide.com



"Beurer UK" Ltd., Suite 16, Stonecross Place
Yew Tree Way,
WA3 2SH Golbornas,
Jungtinė Karalystė

