

Lietošanas pamācība



Uzmanīgi izlasiet šo pamācību, saglabājiet to, sniedziet iespēju arī citiem iepazīties ar tās saturu un vienmēr sekojiet šeit sniegtajiem norādījumiem.

1. Ievads

Birstīte sejas ādas kopšanai FC 45 saudzīgi tīra seju un nodrošina dziļu ādas poru attīrīšanu. Ar birstītes palīdzību Jūs variet ne vien tīrīt sejas ādu, bet arī stimulēt tās asinsapgādi.

2. Piegādes komplekts

- 1 birstīte sejas kopšanai FC 45
- 1 birstīte – uzgalis
- 1 lietošanas pamācība
- 2 baterijas AAA 1,5 V

3. Simbolu skaidrojums

Lietošanas pamācībā, uz iepakojuma un uz ierīces un tās piederumu plāksnītēm uzrādītie simboli nozīmē:

	BRĪDINĀJUMS – nozīmē, ka norādījuma neievērošanas gadījumā pastāv smagu traumu gūšanas vai pat nāves draudi.
	UZMANĪBU – nozīmē, ka norādījuma neievērošanas gadījumā pastāv vieglas vai vidēji smagas traumas gūšanas draudi.
	Stingri ievērojiet pamācībā sniegtos norādījumus.
	Ierīces utilizācija veicama atbilstoši Direktīvas 2002/96/ES „Vecās elektroierīces un elektroiekārtas” (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) prasībām.
	Ražotājs
	Ierīce atbilst Eiropas un nacionālās likumdošanas prasībām.

4. Paredzētā izmantošana

Ierīce paredzēta tikai cilvēku sejas kopšanai (izņemot zonu ap acīm). Birstīti nedrīkst izmantot dzīvnieku purnu ādas apstrādei. Neļaujiet bērniem, jaunākiem par 8 gadiem, rīkoties ar šo ierīci.

Ierīci drīkst izmantot tikai šajā pamācībā uzrādītos nolūkos. Ražotājs nav atbildīgs par kaitējumu, kas var rasties ierīces neatbilstošas izmantošanas vai pieļautās nevēlības dēļ.

5. Norādījumi drošības tehnikā

BRĪDINĀJUMS

- Neļaujiet bērniem spēlēties ar iepakojšanas materiāliem – pastāv nosmakšanas draudi.

- Pirms lietošanas pārbaudiet, vai ierīcei un tās piederumiem nav acīmredzamu defektu. Šaubu gadījumā nelietojiet ierīci un vērsieties pie pārdevēja vai uzrādītājā tehniskās apkalpošanas dienestā.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
- Glabājiet ierīci bērniem nepieklūstamā vietā.
- Šo ierīci nedrīkst lietot jaunāki par 8 gadiem bērni un personas ar ierobežotām fiziskām, maņas vai intelektuālām spējām, vai personas bez pietiekošas pieredzes vai prasmēm, kamēr par to drošību atbildīgā persona neiemāca viņus rīkoties ar šo ierīci.



Esiet piesardzīgi, rīkojoties ar baterijām!

- Akumulatora šķidrumam nokļūstot uz ādas vai acīs, nekavējoties skalojiet aizskarto vietu ar lielu ūdens daudzumu un vērsieties pie ārsta.



• Sargājiet sīkas detaļas no bērniem!

Bērns var norīt bateriju un aizrīties, tāpēc glabājiet tas bērniem nepieklūstamā vietā!

- Pievērsiet uzmanību polaritātes apzīmējumiem: plus (+) un mīnus (-).
- Ja no baterijas izlīst šķidrums, tīriet bateriju nodalījumu ar sausu drāniņu, lietojot aizsargcimdus.
- Sargājiet baterijas no pārmērīga siltuma.
- Sprādziena draudi! Nemetiet baterijas ugunī.
- Baterijas nedrīkst ielādēt un veidot īssavienojumu.
- Ja ierīci ilgstoši nelietojiet, izņemiet baterijas laukā.
- Izmantojiet tikai viena tipa vai līdzvērtīgu tipu baterijas.
- Visas baterijas nomainiet vienlaikus.
- Neizmantojiet uzlādējamus akumulatorus!
- Neizjauciet, neatveriet un nesitiet baterijas.



BRĪDINĀJUMS

Traumēšanās draudi

NELIETOJIET ierīci:

- uz sasprēgājušas ādas;
- uz brūcēm;
- uz slimas vai iekaisušas ādas;
- uzreiz pēc saules peldēm;
- kad lietojiet steroīdus saturošus medikamentus.

Elektroierīču remontu drīkst veikt tikai speciālisti. Nekvalificēti veikts remonts nopietni apdraud lietotājam. Darbības traucējumu vai ierīces bojāšanas gadījumā vērsieties pie kvalificēta personāla specializētā darbnīcā.

6. Ierīces apraksts



7. Sagatavošana lietošanai

7.1. Birstītes ievietošana

- Uzmauciet birstīti uz ierīces turekļa.
- Birstīti noņem, velkot to augšup.

PIEZĪME. Labāku rezultātu panākšanai nomainiet birstīti – uzgali ik pēc četriem mēnešiem.

7.2. Bateriju ievietošana

- Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu ierīces apakšdaļā, velkot to lejup.
- Ievietojiet piegādes komplektā esošās baterijas, ievērojot barojošo elementu pareizu polaritāti (+/-).
- Aizveriet bateriju nodalījumu.

8. Sejas kopšana

- 1) Saslapiniet birstīti ar ūdeni – dariet to vienmēr, jo sausa birstīte var izraisīt ādas kairinājumu.
- 2) Uzklājiet uz sejas ādas attīrošu gēlu.
- 3) Ieslēdziet ierīci, nospiežot un 3 sekundes turot nospiestu IESL./IZSL. pogu. Birstīte sāks rotēt.
- 4) Birstītes rotēšanas ātrumu var regulēt. Ierīci ieslēdzot, birstīte rotē lēni. Ātruma palielināšanai vai samazināšanai nospiediet un palaidiet vaļā IESL./IZSL. pogu.
- 5) Piesardzīgi tuviniet ierīci sejai un vienmērīgām kustībām tīriet tās ādu no netīrumiem, kosmētikas paliekām un atmirušām šūnām. Lai procedūra izraisītu tikai patīkamas sajūtas, nepiespiediet rotējošo birstīti ādai pārāk cieši. Katru ādas iecirkni tīriet ne ilgāk par 20 sekundēm.
- 6) Pēc procedūras ierīci jāizslēdz, nospiežot un 1 sekundi turot nospiestu IESL./IZSL. pogu.
- 7) Rūpīgi mazgājiet seju ar tīru ūdeni, noskalojot visus uz ādas palikušus netīrumus.
- 8) Uzmanīgi nosusiniet seju ar dvieļīti un uzklājiet uz ādas mitrinošu krēmu.
- 9) Vienas seansa ieteicams ilgums ir 1 minūte. Pēc 1 minūtes ierīce automātiski izslēdzas.

9. Ierīces remonts un tīrīšana



- Pirms ierīces tīrīšanas noņemiet birstīti, velkot to augšup. Pēc katras lietošanas rūpīgi mazgājiet birstīti – uzgali ar ūdeni.
- Sekojiet, lai ierīcē neiekļūst ūdens, ja tas tomēr notiek, ierīci drīkst izmantot tikai tad, kad tā pilnīgi izžūst.
- Sargājiet ierīci no triecieniem, mitruma, putekļiem, ķīmikālijām, lielām temperatūras svārstībām un neizvietojiet to siltuma avotu (krāsns, apkures radiatora) tuvumā.
- Tīriet ierīci ar mīkstu, viegli samitrinātu drāniņu. Ļoti netīras virsmas tīrīšanai drāniņu var samitrināt

ziepjuđenī. Nedrīkst izmantot abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.


10. Rezerves daļas un ātri dilstošas detaļas

Rezerves daļas un ātri dilstošas detaļas var iegādāties attiecīgajos servisa centros (skatīt servisa centru sarakstu), uzrādot attiecīgās detaļas numuru. Rezerves birstītes: **605.51**.

11. Utilizācija

Apkārtējās vides aizsardzības nolūkos savu laiku nokalpojošās elektriskās ierīces jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, nogādājot tās speciālu atkritumu savākšanas vietā. Ierīces utilizācija veicama atbilstoši Direktīvas 2002/96/ES „Vecās elektroierīces un elektroiekārtas” (*WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment*) prasībām. Pēc nepieciešamās informācijas vēršaties vietējās pašvaldības attiecīgajā institūcijā. Izlietotās, pilnīgi izlādējušās baterijas jānovieto speciālos konteineros vai jānogādā speciālu atkritumu savākšanas vietā, vai arī elektropreču tirdzniecības vietā. Bateriju utilizācija veicama atbilstoši likuma prasībām.

Šādi apzīmējumi izvietoti uz baterijām, kuras satur kaitīgus materiālus: *Pb* – svins; *Cd* – kadmījs; *Hg* – dzīvsudrabs.

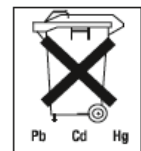

12. Garantija

Materiālu un ražošanas defektiem mēs sniedzam 12 mēnešu garantiju kopš ierīces pārdošanas dienas mazumtirdzniecības tīklā.

Garantija neizplatās uz:

- zaudējumiem, izraisītiem ierīces nepareizas izmantošanas dēļ;
- ātri dilstošām daļām (uzgali, baterijas);
- defektiem, par kuriem pircējam bijis zināms pirkuma brīdī;
- gadījumiem, kuros vainojams pats pircējs.

Prece ir sertificēta: ierīces sejas ādas kopšanai – SIA „Garant Plus”, Nr. TC RU C-DE.AJI 16.B03222, sērija RU Nr. 0258485. derīguma termiņš no 10/03/2015. līdz 09.03.2018.

Izstrādājuma minimālais kalpošanas laiks – 3 gadi.

Ražotājs: Beurer GmbH, Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Vācija

Importētājs: SIA „Beurer”, 109451, Maskava, Pererva iela 62, korpuss 2, 3.birojs

Servisa dienests: 109451, Maskava, Pererva iela 62, korpuss 2, tālr. (fakss) 495-658 54 90,

bts-service@ctdz.ru.

Pārdošanas datums _____

Pārdevēja paraksts _____

Veikala spiedogs _____

Pircēja paraksts _____

FC45 sejas birstite LV.doc