

beurer FB 12



Jalavann Kasutusjuhend

Hea klient!

Täname, et ostsite meie toote. Meie tootemark esindab kõrgtehnoloogilisi ja kvaliteetseid tooteid, mille valmistamisel on peetud oluliseks uuenduslikkust ja ohutust. Meie tootevalikusse kuuluvad tervise- ja heaoluvaldkonna tooted, mis on mõeldud kasutamiseks järgmistes valdkondades: soojendamine, kehakaalu, vererõhu, kehatemperatuuri ja pulsi mõõtmine, rahustav teraapia, massaaž ja ventilatsioon. Lugege see juhend põhjalikult läbi ja hoidke kohas, kus ka teised seadme kasutajad selle vajadusel kätte saavad.

Lugupidamisega,
teie Beurer

Tootepakendis olevad esemed:

- Jalavann
- See kasutusjuhend

HOIATUS!

- Seade on mõeldud kasutamiseks üksnes kodus, mitte ärilistel eesmärkidel.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused või oskused, tohivad seadet kasutada nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.

- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Kui seadme toitejuhe on saanud kahjustada, tuleb see kasutuselt kõrvaldada. Kui toitejuhet ei saa seadme küljest ära võtta, ei saa seadet enam kasutada ja see tuleb ära visata.
- Kui seadmele tekib vett, ei tohi seda enam kasutada.
- Seadme pind muutub kasutamisel kuumaks. Inimesed, kelle kuumatundlikkus on häiritud, peavad seadme kasutamisel ettevaatlikud olema.

Sümbolite selgitus

Kasutusjuhendis ja etiketil kasutatakse järgmisi sümboleid:



HOIATUS! Kehavigastuste või tervisekahjustuste oht.



ETTEVAATUST! Ohutusalased nõuanded, mille eiramisel võite toodet / tarvikuid kahjustada.



Märkus Olulist teavet sisaldav märkus.



Seadmel on kahekordne kaitsev isolatsioonikiht ja seetõttu vastab see II kaitseklassi seadmetele esitatavatele nõuetele.



Kasutada ainult siseruumides

1. Seadmega tutvumine

Üldine teave

Jalgadel on väga oluline roll, kuna nad peavad kandma kogu meie kehamaassi.

Inimese jalg koosneb 26 luust, 22 liigesest ja 107 sidemest, mis kõik vajavad hooldamist. Beureri jalavann on selleks sobiv abiline. Örn vibromassaaž lõõgastab pinges lihaseid ning vaid mõne minuti pärast tunnete end rohkem lõõgastunud ja stressivabana. Mullivann muudab seda mõju veelgi tugevamaks.

Soovitav: arnika, rosmariini või meresoola ekstraktide vannivette lisamine stimuleerib vereringet.

Lavendli või tüümiani lisamisel leigesse vannivette saate lõõgastust oma väsinud jalgadele.

Jalaspaa koosneb järgmistest osadest:

- masseerivate nupukestega jalatugi,
- massaažiseade,

- 3 funktsiooni: vibromassaaž, mullimassaaž ja vee temperatuuri kontroll.

2. Nõuetekohane kasutamine

Käesolev seade on mõeldud ainult jalgade eest hooldamiseks.



HOIATUS!

Ärge kasutage jalavanni:

- kui teie jalgadel on haigusest või vigastusest tingitud muutusi (nt lahtised haavad, soolalüükad, seennakkus);
- loomadel;
- kauem kui 40 minutit (ülekuumenemise oht); lisaks laske seadmel enne selle uuesti kasutamist vähemalt 15 minutit jahtuda.

Konsulteerige enne jalavanni kasutamist oma arstiga järgmistel juhtudel:

- kui te ei ole kindel, kas seade teile sobib;
- te põete mõnd rasket haigust või taastute jalapiirkonnas tehtud operatsioonist;
- teil on diabeet või tromboos;
- teil on veenilaiendid, veenipõletik vms;
- teil on teadmata päritolu valu.

Seadet tohib kasutada ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud eesmärgil. Tootja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on tingitud seadme mittesihipärasest või hooletust kasutamisest.

3. Ohutusteave

Enne kasutamist lugege see kasutusjuhend tähelepanelikult läbi. Alltoodud teabe eiramine võib põhjustada isikuvigastusi või varalist kahju. Hoidke juhendit edaspidiseks kasutamiseks kohas, kus see ka teistele seadme kasutajatele kättesaadav on. Seadme müümise või kellelegi teisele kasutada andmise korral andke palun kaasa ka kasutusjuhend.



Märkus

- Hoidke seadme pakendit lastele kättesaamatus kohas. Lämpumisoht.
- Enne toote kasutamist veenduge, et seadmel ja selle tarvikutel ei ole nähtavaid kahjustusi. Kahtluste korral ärge seadet kasutage ning võtke ühendust seadme müünud kaupluse või vastava klienditeeninduskeskusega.
- Kui seadme töös tekib kasutamise ajal tõrge, siis lülitage seade kohe välja ja eemaldage see vooluvõrgust. Ärge üritage jalavanni ise remontida. Asjatundmatu isiku tehtud remont võib tekitada väga ohtliku olukorra.
- Ärge torgake, väänake ega painutage toitejuhet. Ärge torgake juhtme sisse knopkasid, nõelu ega muid teravaid esemeid.
- Ärge asetage toitejuhet teravatele või teravatipulistele objektidele ega tõmmake juhet üle nende.
- Sisestage pistik pessa, mis on kaitstud niiskuse, vee ja veepritsmete eest.

- Lapsed tohivad seadet kasutada vaid järelevalve all.
- Jalavanni täitmiseks ei tohi seda asetada duši alla, vanni ega pesunõusse.
- Ärge avage seadme korpust.
- Kui seade on maha kukkunud või muul viisil kahjustada saanud, ei tohi seda enam kasutada.
- Elektriseadmete remonttööd tohivad teha ainult vastava väljaõppe saanud tehnikud. Valesi remonditud seadmed võivad kasutajatele tõsist ohtu kujutada. Kui seade vajab remonti, võtke ühendust meie klienditeeninduse või volitatud edasimüüjaga.

Elektrilöögi oht!



HOIATUS!

Seda jalavanni, nagu iga teistki elektriseadet, tuleb elektrilöögi vältimiseks käsitseda ettevaatlikult ja tähelepanelikult.

Seetõttu tuleb seadme kasutamisel järgida järgmisi nõudeid.

- Seadme tohib ühendada vaid sellel märgitud tingimustele vastava vooluallikaga.
- Kui seadmel või selle tarvikutel on nähtavaid kahjustusi, ei tohi seadet kasutada.
- Ärge kasutage seadet äikesel ajal. Rikke tekkimisel või defekti tuvastamisel lülitage seade kohe välja ja eemaldage see vooluvõrgust; kui soovite seadme vooluvõrgust eemaldada, ärge tehke seda juhtmest või seadmest tõmmates. Ärge kandke seadet selle toitejuhtmest hoides. Ärge asetage juhtmeid kuumade pindade lähedale. Jalavann tuleb vooluvõrku ühendada enne, kui te oma jalad vette panete. Rikke korral võite vastupidises järjekorras tegutsedes saada eluohtliku elektrilöögi.



Veenduge, et pistik ega toitejuhe ei puutu kokku vee ega muude vedelikega. Seetõttu tuleb seadme kasutamisel järgida järgmisi nõudeid:

- Kasutage seda ainult kuivades siseruumides (mitte kunagi vannis ega saunas).
- kasutage seadet ainult kuivade kätega.
- Ärge asetage seadet vette. Kui seade kukub vette, ärge torgake seda kohe välja võtma. Tõmmake seadme pistik kohe pesast välja.

Tulekahju oht!



HOIATUS!

Seadme vääril kasutamisel või kasutusjuhendi eiramisel on seade tuleohtlik.

Seetõttu tuleb seadme kasutamisel järgida järgmisi nõudeid.

- Ärge jätke seadet järelevalveta, seda eriti juhul, kui läheduses viibivad lapsed.
- Ärge kasutage seadet patjade või linadega kinni kaetuna.
- Ärge kunagi kasutage seadet bensiini ega teiste kergsüttivate materjalide läheduses.

- Ärge asetage seadet pehmele vaibale, sest see võib seadme õhutusavad kinni katta.


Käsitsemine



ETTEVAATUST!

- Pärast seadme kasutamist ja/või enne puhastamist lülitage seade alati välja ja tõmmake selle pistik pesast välja.
- Hoidke seade eemal kõrgetest temperatuuridest.
- Ärge tõuske püsti, kui teie jalad on vannis.
- Täitmise ajal ei tohi jalavann olla ühendatud vooluvõrku.
- Enne jalavanni liigutamist või puhastamist eemaldage see alati vooluvõrgust..

4. Jalavanni kirjeldus

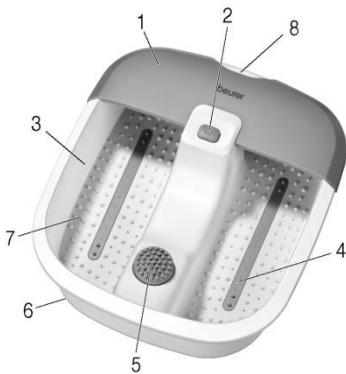

1. Pritsimiskaitse
2. Funktsiooninupp
3. Täitmisaseme näidik
4. Mullitoru
5. Massaažiseade
6. Kummist tugijalad (seadme all)
7. Masseerivate nupkestega jalatugi
8. Väljavooluava

5. Kasutamine

Seadme kasutamise alustamine

- Võtke seade pakendist välja.
- Kontrollige, ega seadmel, toiteallikal ega juhtmetel ole kahjustusi.
- Enne jalavanni pistiku ühendamist pesa täitke jalavann kuni täitmisaseme näidikuni (ligikaudu 4 cm ulatuses) kas sooja või külma veega. Jalatugi peab olema täielikult veega kaetud.
- Vedage juhe ohutust kohast, kus keegi selle otsa ei komistaks.
- Asetage seade siledale, ühetasasele pinnale.

Seadke ennast mugavalt istuma, asetage jalad jalatugedele ja suruge jalgadega õrnalt vastu põhja. Ärge tõuske püsti, kui teie jalad on vannis. Seadme kummist tugijalad takistavad sel libisemast. Lülitage seade sisse. Selleks vajutage funktsiooninuppu (2).

Vibromassaaž, mullimassaaž ja vee temperatuuri reguleerimine käivituvad samaaegselt.

Massaažiseade

Massaažitarvik pakub jalgadele lõdvestavat massaaži ja ergutab vereringet. Selle saab puhastamiseks eemaldada.



Märkus

- Konkreetse jalatallapunkti masseerimine võib mõjutada sellele vastavat kehaosa. Enne reflektorsete piirkondade massaažirežiimi kasutamist soovitame teil tutvuda selleletemalise kirjandusega ja pidada nõu arstiga, olema kindel, et saavutate soovitud tulemuse.
- Jalatõe alla on kinnitatud soojendi. Soojendiga saab vett kauem soojana hoida. Soojendiga ei tohi soojendada külma vett. Soovitame ühe massaažiseansi pikkuseks kuni 40 minutit.
- Pärast kasutamist tühjendage jalavann äravooluava [8] kaudu veest.

6. Hooldustööd ja hoiustamine

Pärast kasutamist loputage jalavanni kraaniveega. Jalavanni võib puhastada õrna mittevahutava puhastusainega, nt neutraalse äädikaga. Õhutoru kuivatamiseks pärast puhastamist lülitage mullimassaaž ligikaudu 10 sekundiks sisse. Mullitorust tulevad veepiisad saab ära pühkida lapiga.



Märkus

- Ärge laske veel jalavanni sisemusse pääseda.
- Hoidke jalavanni kuivas kohas selle originaalpakendis.
- Ärge jätke jalavanni pikemaks ajaks pakendist välja.

7. Tehniline spetsifikatsioon

Toide 220–240 V ~ 50/60 Hz 60 W

8. Kasutuselt kõrvaldamine

Keskonnakaitse tagamiseks ärge visake kasutuskoõlbmatuks muutunud seadmeid olmeprügi hulka. Viige töökoõlbmatuks muutunud seade vastavasse kogumis- või ümbertöötlemiskeskusesse.

Seadmete kasutuselt kõrvaldamisel tuleb järgida EÜ WEEE-direktiivi (elektrilised ja elektroonilised jäätmed) sätestatud nõudeid. Küsimuste korral võtke ühendust jäätmekäitluse eest vastutava kohaliku asutusega.



Hooldustöökoda: Renerki Kaubanduse OÜ, 651 2222, klienditeenindus@renerk.ee, Avatud E-R 9:00-18:00

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918