

Kāju hidromasāžas vanna Lietošanas pamācība

Cienītais pircēj!

Mēs esam gandarīti, ka esat izvēlēties mūsu ražojumu. Mūsu kompānija ražo mūsdienīgus, rūpīgi pārbaudītus visaugstākās kvalitātes izstrādājumus, kas paredzēti ķermeņa svara un temperatūras, asinsspiediena un pulsa mērīšanai, maigai terapijai un masāžai.

Uzmanīgi izlasiet šo instrukciju un glabājiet vietā, kur arī citi ierīces lietotāji nepieciešamības gadījumā varētu tai piekļūt.

Vēlot visu to labāko, *Beurer* kolektīvs

Piegādes komplekts

- Kāju hidromasāžas manna
- Lietošanas pamācība



BRĪDINĀJUMS

- Ierīce ir paredzēta lietošanai privātām vajadzībām, tās izmantošana komercdarbībā ir aizliegta.
- Šo ierīci drīkst lietot vecāki par 8 gadiem bērni un personas ar ierobežotām fiziskām, maņas vai intelektuālām spējām tikai par to drošību atbildīgo personu uzraudzībā un būdami informēti par ierīces drošu lietošanu un iespējamo bīstamību.
- Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
- Tīrīt un tehniski apkalpot ierīci bērni drīkst tikai pieaugušo uzraudzībā.
- Bojāto barojošo vadu nepieciešams nomainīt, bet, ja vads nav noņemams, tad ierīce ir jāutilizē.
- Ūdens sūces gadījumā ierīci lietot ir aizliegts.
- Ierīces virsma darbības laikā sakarst. Pret siltumu mazjutīgām personām ierīces lietošanas laikā jābūt piesardzīgiem.

Simbolu skaidrojumi

Lietošanas pamācībā un ražotāja plāksnītē izmantotie simboli nozīmē:



Brīdinājums: brīdina par iespējamo traumu vai veselības kaitējumu.



Uzmanību: brīdina par iespējamo ierīces vai tās piederumu bojāšanu.



Norādījums: satur svarīgu informāciju.



Ierīcei ir dubulta izolācija, līdz ar to tā atbilst aizsardzības 2. klasei.



Izmantot tikai telpās.

6. Vispārīgas ziņas

Jūsu kāju labsajūtai

Kājām, ka zināms, mūsu dzīvī ir ļoti svarīga loma – tās uzņem cilvēka ķermeņa visu svaru. Vai jums ir zināms, ka katras mūsu kājas stingrā konstrukcija sastāv no 26 kauliem, 22 locītavām un 107 saitēm? Šis anatomiskais šedevrs pieprasa rūpīgu kopšanu. Nopērkot šo kāju hidromasāžas vannu, jūs spērāt svarīgu soli pareizā virzienā.

Vibromasāžas mērenās svārstības atslābina sasprindzinātus muskuļus. Jau pēc dažām minūtēm jūsu labsajūta uzlabosies un šo efektu pastiprina hidromasāžas.

Padoms: kārstās kāju vannas ar arniku un rozmarīnu vai jūras sāls ekstraktu uzlabo asinsriti. Siltās kāju vannas ar lavandu vai mārsili – īsta bauda nogurušām kājām.

Šai burbuļvannai komplektā ir vairāki piederumi, tādi kā:

- balsts pēdu intensīvai masāžai;
- uzgalis pedikīram;
- 3 funkcijas: vibromasāža, hidromasāžas un ūdens uzsildīšana;

7. Lietošana

Šī ierīce ir paredzēta vienīgi kāju kopšanai.



Uzmanību! Burbuļvanniņu nedrīkst lietot:

- pie ādas kāju zonā patoloģiskām izmaiņām vai traumām (plēstas brūces, pumpas, sēnīšu infekcijas);
- dzīvnieku kopšanai;
- ilgāk par 40 minūtēm, jo ierīce var pārkarst. Pirms nākamās lietošanas ļaujiet ierīcei atdzist vismaz 15 minūtes.

Pirms burbuļvannas lietošanas konsultējieties ar savu ģimenes ārstu, ja:

- neesiet pārlicināti, ka kāju burbuļvanna jums ir piemērota;
- ciešat no smagas slimības vai jums ir bijusi kājas operācija;
- pie cukurslimības, trombozes;
- pie apakšējo ekstremitāšu slimībām (vēnu paplašināšanās, vēnu iekaisums);
- pie nenoskaidrotas izcelsmes sāpēm.

Ierīci drīkst izmantot tikai šajā lietošanas pamācībā uzrādītajiem mērķiem. Ražotājs nav atbildīgs par kaitējumu, kas nodarīts ierīces nepienācīgas vai nepareizas izmantošanas rezultātā.

8. Drošības tehnikas norādījumi

Uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un stingri ievērojiet šeit sniegtos norādījumus. Saglabājiet šo pamācību turpmākai izmantošanai vai nodošanai citam lietotājam.



Norādījumi:

- Neļaujiet bērniem spēlēties ar iepakojšanas materiāliem – pastāv nosmakšanas draudi.
- Pirms lietošanas pārbaudiet, vai ierīcei un tās piederumiem nav acīmredzamu bojājumu. Šaubu gadījumā vērsieties pie ierīces pārdevēja vai pamācībā uzrādītajā servisa dienestā.
- Pirms katras ierīces lietošanas pārbaudiet, vai vannas saliekamā sienīņā nav radušās plaisas un vai nav vērojama ūdens ūde.
- Kāju hidromasāžas vannas saliekamā sienīņā nedrīkst iespraust asus priekšmetus.
- Neglabājiet kāju hidromasāžas vannā asus priekšmetus, jo tie var bojāt vannas sienīņas.
- Nekavējoties izslēdziet ierīci, ja tās darbības laikā radušies traucējumi, un izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas. **Aizliegts** patstāvīgi remontēt ierīci: nekvalificēts remonts lietotājam ir ļoti bīstams. Nepieciešamības gadījumā vērsieties servisa dienestā.
- Nevelciet aiz elektriskā vada, neļaujiet tam savīties un salocīties.
- Sargājiet vadu no saskarsmes ar asiem priekšmetiem.
- Kontaktdakšas iesprausšanai izmantojiet ūdensdrošu kontaktlīdzi.
- Lietojot ierīci, bērniem jāatrodas pieaugušo uzraudzībā.
- Kāju vannu **nedrīkst** uzpildīt ar ūdeni dušas kabīnē, vannā vai virs izlietnes.
- **Kategoriski aizliegts** atvērt ierīces korpusu.
- Ja ierīce nokrīt vai tai rodas kādi citi bojājumi, tās tālākā lietošana ir **aizliegta**. Tādā gadījumā nogādājiet to remontam.

Elektriskās strāvas trieciena draudi



Brīdinājums! Tāpat kā ar jebkuru citu elektroierīci ar šo kāju burbuļvannu jārikojas ļoti uzmanīgi un piesardzīgi, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena. Tāpēc ievērojiet šādas prasības:

- elektriskās strāvas spriegumam jāatbilst tam, kas uzrādīts uz ierīces;

- **nekādā gadījumā** neizmantojiet ierīci, ja tā vai tās piederumi ir acīmredzami bojāti;
- **nekādā gadījumā** neizmantojiet ierīci pērkona negaisa laikā.

Ierīces bojāšanas vai darbības traucējumu gadījumā nekavējoties izslēdziet to un atslēdziet no elektrības, izvelkot kontaktdakšu no kontaktligzdas. Lai to izdarītu, nevelciet aiz vada vai aiz pašas burbuļvannas, bet turaties aiz kontaktdakšas. Tāpat nedrīkst, turot aiz vada, ierīci pārvietot. Uzmanāties, lai ierīces elektriskais vads nepieskaras karstām virsmām.

Kategoriskie aizliegts pieslēgt ierīci elektriskajam tīklam, kad jūsu kājas jau atrodas ūdenī. Ja nu ierīce tomēr ir bojāta, jums draud dzīvībai bīstams elektriskās strāvas trieciens.



Sekojiet, lai kontaktdakša un elektriskais vads nesaskaras ar ūdeni vai citiem šķidrumiem, tāpēc lietojiet ierīci tikai:

- sausā telpā (nedrīkst izmantot vannas istabā, saunā);
- sausām rokām.

Kategoriski aizliegts iegremdēt ierīci ūdenī. Ja ierīce nejauši iekrīt ūdenī, nekādā gadījumā nepieskarieties tai un nekavējoties izvelciet tās kontaktdakšu no kontaktligzdas.

Ugunsgrēka draudi



Brīdinājums. Ierīces nepareiza lietošana un šajā pamācībā sniegto norādījumu neievērošana var izraisīt ugunsgrēka draudus. Tāpēc ievērojiet šādas prasības:

- neatstājiet ierīci bez uzraudzības, it īpaši, ja tuvumā atrodas bērni;
- nekādā gadījumā nedrīkst ierīci nosegt, teiksim, ar segu, spilvenu un tml.;
- nekādā gadījumā nedrīkst ierīci lietot viegli uzliesmojošu vielu tuvumā, piemēram, benzīna un tml.
- Neizvietojiet vannu uz mīksta paklāja, jo tā plūksnas var nosegt ventilācijas spraugas.


Lietošanas noteikumi



Uzmanību!

- Pēc katras lietošanas reizes un vienmēr pirms tīrīšanas ierīci ir jāizslēdz, izvelkot kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Sargājiet ierīci no augstām temperatūrām.
- Neatstājiet strādājošu ierīci bez uzraudzības.
- Neliekat kājas vai kādus priekšmetus uz ar ūdeni uzpildītas vannas malām, jo vanna var salocīties un ūdens iztecēs.
- Uzpildot ierīci ar ūdeni, tā nedrīkst būt pieslēgta elektrotīklam.
- Pirms ierīces pārvietošanas vai tīrīšanas izslēdziet ierīci un izvelciet tās kontaktdakšu no kontaktligzdas.

9. Ierīces apraksts

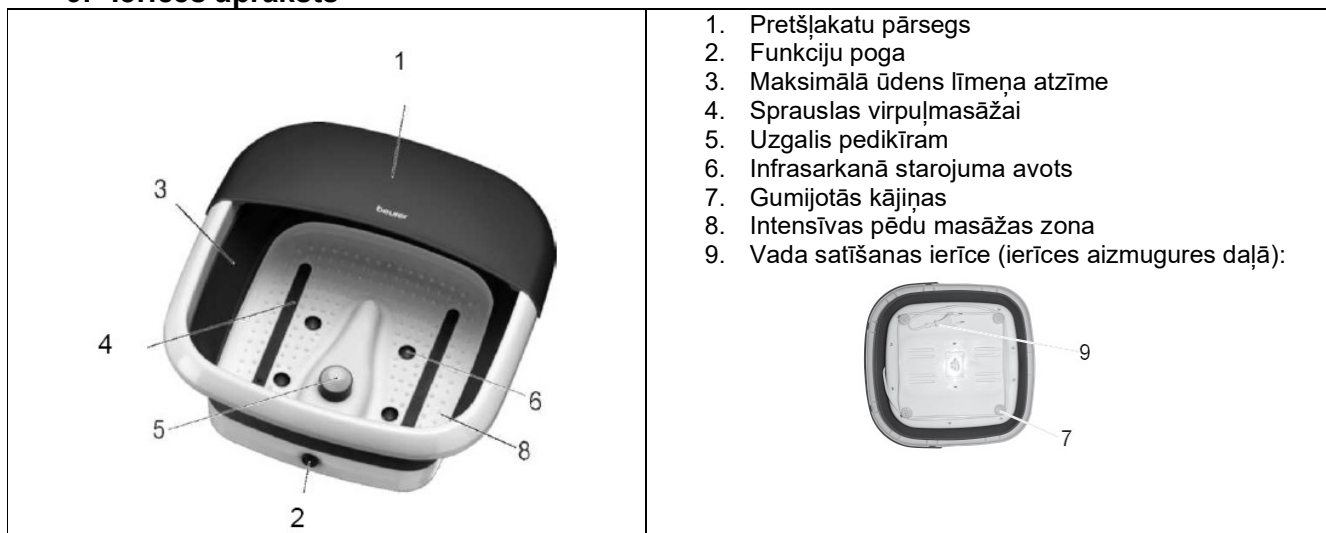

5. Lietošana

- Noņemiet iepakojumu.
- Paceļat saliekamo vannas sienu, ar vienu roku spiežot uz vannas dibenu, bet ar otru roku velkot augšup sienas augšmalu.

1



2



3



- Pārbaudiet, vai ierīces korpuss, kontaktdakša un vads nav bojāti.
- Pirms pieslēgt vannu elektrībai uzpildiet to ar siltu vai aukstu ūdeni, nepārsniedzot maksimālā ūdens līmeņa atzīmi (apmēram 6 cm) – kāju paliktņim jābūt pilnībā pārklātam ar ūdeni.
- Izvietojiet vadu tā, lai neaizķeros aiz tā un nepakluptu.
- Izvietojiet kāju hidromasāžas vannu uz cietas un līdzenas virsmas.

Apsēžaties jums ērtā pozīcijā un izvietojiet kāju pēdas uz masējošiem balstiem, viegli spiežot uz tiem. Nekad nestāviet vannā. Burbuļvannas gumijotās kājiņas (7) novērš tās slīdēšanu.

Ieslēdziet ierīci, nospiežot funkciju pogu (2), līdz ar to vienlaikus sāks darboties vibromasāža, virpuļmasāžai un vienmērīgas ūdens temperatūras uzturēšana.

Vēlreiz nospiežot šo pogu, ieslēgsies infrasarkanais starojuma avots.

Visu funkciju atslēgšanai atkal nospiediet funkciju pogu (2).

Uzgalis pedikīram

Uzgalis pedikīram vannas centrā kalpo atmirušās ādas daļiņu noslīpēšanai un to var noņemt tīrīšanai.



Norādījumi

- Masējot pēdas konkrētu vietu, iespējams pozitīvi iedarboties uz dažādiem cilvēka orgāniem. Lai vairāk uzzinātu par reflektoro zonu punktu masāžas efektivitāti, vērsieties pie sava ārstā un lasiet literatūras avotos.
- Zem pēdu atbalsta virsmas atrodas sildelements. Ieslēdzot to, kādu laiku ūdens saglabājas silts. Taču sildelements nav paredzēts aukstā ūdens uzsildīšanai. Masāžas optimālākā efekta sasniegšanai masēt pēdas ieteicams ne ilgāk par 40 minūtēm.

Pēc burbuļvannas izmantošanas izlejiet ūdeni caur tās korpusa šauru galu.

6. Kopšana un uzglabāšana

Pēc ierīces izmantošanas skalojiet tās iekšpusi zem ūdens strūkļas. Ierīces tīrīšanai var izmantot saudzīgus tīrīšanas līdzekļus (neputojušus). Gaisvadu susināšanai var izmantot virpuļmasāžas režīmu bez ūdens, darbinot to ne ilgāk par 10 sekundēm. Ūdeni, kas izšļakstās no virpuļmasāžas sprauslām, jānoslauka ar sausu drāniņu.



Norādījumi:

- Uzmanāties, lai ūdens neiekļūst ierīces iekšpusē.
- Uzglabājiet burbuļvannu saliktā veidā oriģinālā iepakojumā sausā vietā.
- Neatstājiet ierīci atvērtu ilgstoši.

7. Tehniskie dati

Pieslēgums elektrotīklam: 220–240 V, 50 /60Hz, 60 W

8. Utilizācija

Iepakojšanas materiālus un pašu ierīci kategoriski aizliegts izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem – tās utilizācija veicama atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ierīces utilizācija veicama atbilstoši Direktīvas 2002/96/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE, *Waste Electrical and Electronic Equipment*) prasībām. Pēc nepieciešamās informācijas vērsieties vietējās pašvaldības attiecīgajā institūcijā.



9. Garantija

Materiālu un ražošanas defektiem mēs sniedzam 24 mēnešu garantiju kopš ierīces pārdošanas dienas mazumtirdzniecības tīklā.

Garantija neizplatās uz:

- zaudējumiem, izraisītiem ierīces nepareizas izmantošanas dēļ;
- ātri dilstošām daļām (uzgaļi);
- defektiem, par kuriem pircējam bijis zināms pirkuma brīdī;
- gadījumiem, kuros vainojams pats pircējs.

Ražotājs:

Beurer GmbH, Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Vācija