



Infrapuna massaažiseade Kasutusjuhend



Hea klient!

Täname, et ostsite meie toote. Meie kaubamärgi alla kuuluvad kvaliteetsed põhjalikult katsetatud tooted, mis on mõeldud kasutamiseks järgmistes valdkondades: soojendamise, kaalumise, vererõhu, kehatemperatuuri ja pulsi mõõtmine, rahustav teraapia, massaaž, õhutamine ja ilutooted. Lugege see juhend põhjalikult läbi ja hoidke kohas, kus ka teised seadme kasutajad selle vajadusel kätte saavad.

Lugupidamisega,
teie Beurer



HOIATUS!

- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused või oskused, tohivad seadet kasutada nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamise seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Kui seadme toitejuhe on saanud kahjustada, tuleb see kasutuselt kõrvaldada. Kui toitejuhett ei saa seadme küljest ära võtta, ei saa seadet

enam kasutada ja see tuleb ära visata.

- Seadme avadesse ega liikuvate osade vahele ei tohi sattuda mingeid esemeid. Kõik pöörlevad osad peavad kogu aeg vabalt liikuda saama.
 - Ärge suruge ega jätke ühtegi oma kehaosa, eelkõige sõrmi, pöörlevate masseerimispeade ja nende kinnituskohdade vahele.
 - Seadme pind läheb kasutamisel kuumaks. Inimesed, kelle kuumatundlikkus on häiritud, peavad olema seadme kasutamisel ettevaatlikud.
-

Tootepakendis olevad esemed:

- Infrapuna massaažiseade
- Vahetatavad massaažitarvikud (2 tk)
- See kasutusjuhend

Sümbolite selgitus

Kasutusjuhendis ja etiketil kasutatakse järgmisi sümboleid:



HOIATUS! Kehavigastuste või tervisekahjustuste oht.



ETTEVAATUST! Ohutusalasel nõuanded, mille eiramisel võite toodet / tarvikuid kahjustada.



Märkus. Oluline teave.



Seadmel on kahekordne kaitsev isolatsioonikiht ja seetõttu vastab see II kaitseklassi seadmetele esitatavatele nõuetele.



Kasutada ainult sisetingimustes

1. Seadmega tutvumine

Funktsioonid

Selle seadmega saate teha lõõgastavat massaaži nii endale kui ka kellelegi teisele. Massaaž võib olla nii lõõgastav kui ka stimuleeriv ja seda kasutatakse tihti krampi tõmbunud või pinges lihaste, valu või väsimuse leevendamiseks.

Seade on mõeldud ainult eraviisiliseks kasutamiseks ning seda ei tohi kasutada meditsiinilisel ega kommertseesmärgil.

2. Nõuetekohane kasutamine

See seade on mõeldud ainult inimkeha üksikute osade masseerimiseks. Seadme kasutamine ei asenda arstlikku ravi. Kui mõni alltoodud hoiatustest kehtib ka teie kohta, ei tohi te seda seadet kasutada. Kui te ei ole kindel, kas tohite seadet kasutada, pidage nõu arstiga.



HOIATUS!

Massaažiseadet ei tohi kasutada:

- Loomade masseerimiseks.
- Inimesed, kellel on selgrookahjustusi.
- Mitte kunagi ei tohi seadet kasutada südamerütmuriga inimeste südamepiirkonna masseerimiseks. Südamerütmuriga inimeste mis tahes kehapiirkonna masseerimiseks tuleb alati eelnevalt arstiga nõu pidada.
- Mitte kunagi ei tohi masseerida paistes, põlenud, põletikulist või kahjustunud nahka või kehaosa.
- Massaažiseadet ei tohi kasutada raseduse ajal.

- Ärge kasutage massaažiseadet näol (silmadel), kõril ega muudel eriti tundlikel kehaosadel.
- Seadme kasutamise ajal ei tohi magama jääda!
- Ärge kasutage seadet pärast ravimite või alkoholi tarbimist (nõrgenenud ümbruse taju korral).

Pidage enne massaažiseadme kasutamist oma arstiga nõu juhul, kui:

- te põete mõnd rasket haigust või taastute operatsioonist,
- kui teil on mõni järgnevatest seisunditest: tavaline nohu koos palavikuga, veenilaiendid, tromboos, flebiit, kollatõbi, diabeet, närvisüsteemi haigused (näiteks ishias) või akuutne põletik,

Seadet tohib kasutada ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud eesmärgil. Tootja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on tingitud seadme mittesihipärasest või hooletust kasutamisest.

3. Ohutusteave

Enne kasutamist lugege see kasutusjuhend tähelepanelikult läbi. Alltoodud teabe eiramine võib põhjustada isikuvigastusi või varalist kahju. Hoidke juhendit edaspidiseks kasutamiseks kohas, kus see ka teistele seadme kasutajatele kättesaadav on. Seadme müümise või kellelegi teisele kasutada andmise korral andke palun kaasa ka kasutusjuhend.



HOIATUS!

Hoidke seadme pakendit lastele kättesaamatus kohas. Lämpumisoht.

Elektrilöögi oht!



HOIATUS!

Seda massaažiseadet, nagu iga teistki elektriseadet, tuleb elektrilöögi vältimiseks käsitseda ettevaatlikult ja tähelepanelikult.

Seetõttu tuleb seadme kasutamisel järgida järgmisi nõudeid.

- Seadme tohib ühendada vaid sellel märgitud tingimustele vastava vooluallikaga.
- Kahjustada saanud seadet ega selle otsakuid ei tohi kasutada.
- Seadet ei tohi kasutada äikese ajal.

Rikke tekkimisel või defekti tuvastamisel lülitage seade kohe välja ja eemaldage see vooluvõrgust; kui soovite seadme vooluvõrgust eemaldada, ärge tehke seda juhtmest või seadmest tõmmates. Ärge kandke seadet selle toitejuhtmest hoides. Ärge asetage juhtmeid kuumade pindade lähedale. Ärge avage seadet. Kui seadme toitejuhe on kahjustada saanud, peab selle ohu vältimiseks välja vahetama tootja või volitatud klienditeeninduse tehnik; Jälgige, et massaažiseade, pistik ega kaabel ei puutuks kokku vee ega muude vedelikega.

Seetõttu tuleb seadme kasutamisel järgida järgmisi nõudeid:

- Seadet tohib kasutada vaid kuivades siseruumides.
- Kasutage seadet ainult kuivade kätega.
- Ärge kasutage seadet vannis, duši all või täidetud veenõu läheduses olles.
- Ärge kasutage seadet mullivannis, basseinis ega saunas.
- Ärge kasutage seadet väliskeskonnas.

Kui seade kukub vette, ärge tormake seda kohe välja võtma. Tõmmake seadme pistik kohe pesast välja.

Seadme remont



HOIATUS!

Elektriseadmete remonttöid tohivad teostada ainult vastava väljaõppe saanud tehnikud. Valesti remonditud seadmed võivad kasutajatele tõsist ohtu kujutada. Kui seade vajab remonti, võtke ühendust meie klienditeeninduse või volitatud edasimüüjaga.

Tulekahju oht!



HOIATUS!

Seadme valesti kasutamisel või kasutusjuhendi eiramisel võib tekkida tuleohtlik olukord.

Seetõttu tuleb seadme kasutamisel järgida järgmisi nõudeid.

- Ärge kasutage seadet rohkem kui 20 minutit järjest (ülekuumenemise oht) ja laske sellel siis 15 minutit jahtuda.
- Ärge jätke seadet järelevalveta, seda eriti juhul, kui läheduses viibivad lapsed.
- Ärge kasutage seadet patjade või linadega kinni kaetuna.

Käsitsemine



TÄHELEPANU!

Pärast seadme kasutamist ja enne puhastustöid lülitage seade välja ja tõmmake pistik pesast välja.

- Veenduge, et kõik pöörlevad osad saavad kogu aeg vabalt liikuda.
- Jälgige, et juukseid seadme vahele kinni ei jääks.
- Vältige kokkupuudet teravate esemetega.
- Ärge tõmmake juhtmest.
- Veenduge, et seade ei ole liiga lähedal soojusallikatele (nagu ahjud, radiatorid või otsene päikesevalgus).

Kasutuselt kõrvaldamine




TÄHELEPANU!

Keskonnakaitse tagamiseks ärge visake seadet olmeprügi hulka.

Viige tööõlmatuks muutunud seade vastavasse kogumis- või ümbertöötlemiskeskusesse. Seadmete kasutuselt kõrvaldamisel tuleb järgida EÜ WEEE-direktiivis (elektrilised ja elektroonilised jäätmed) sätestatud nõudeid. Küsimuste korral võtke ühendust jäätmekäitluse eest vastutava kohaliku asutusega.



4. Seadme kirjeldus

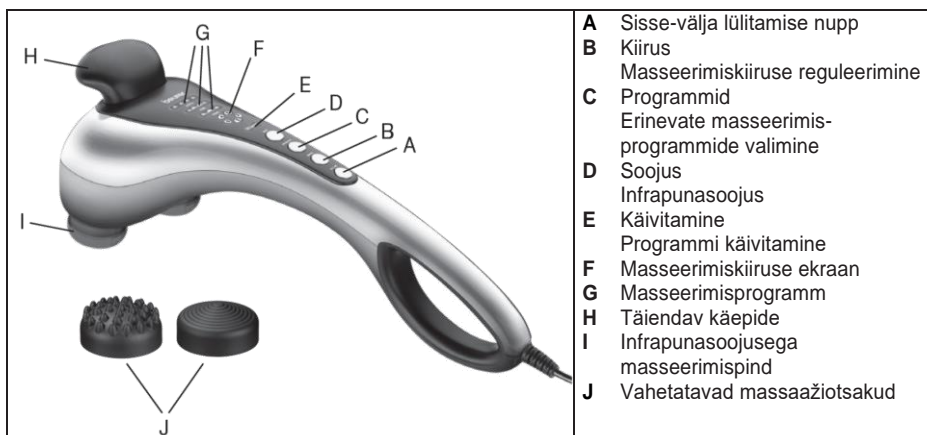

5. Seadme kasutamise alustamine

- Eemaldage seadme pakkematerjalid ja kaitsekate.
- Kontrollige, ega seadmel, toiteallikal ega juhtmetel ole kahjustusi.
- Ühendage seade vooluvõrku. Seade peab olema välja lülitatud.
- Vedage juhe ohutust kohast, kus keegi selle otsa ei komistaks.

6. Kasutamine

Enne toitejuhtme pistiku ühendamist pistikupessa veenduge, et seade on välja lülitatud. Lülitage seade sisse-välja lülitamise nupust sisse. Programm käivitub.

Masseerimiskiirust saab suurendada ja vähendada ühe seadistuse võrra, vajutades kiirusenuppu. Saate valida kolme erineva massaažiprogrammi vahel (automaatsete kiiruseseadistustega), vajutades programminuppu.

- **Lõõgastav:** laine kujuline lõõgastav massaaž.
- **Ergutav:** vibreeriv ja pulseeriv massaaž.
- **Aktiivne:** läbitungiv ja pulseeriv massaaž.

Infrapunasoojuse saab sisse lülitada mis tahes massaažiprogrammiiga, kasutades selleks soojusnuppu.

Suunake seade mõlema käega masseeritavasse kehapiirkonda. Võite masseerimise ajal seista, istuda või lamada ning saate masseerida ennast või kedagi teist. Massaaži intensiivsuse muutmiseks suruge seadmele kas tugevamalt või nõrgemalt. Ühte kehaosa ei tohi masseerida järjest rohkem kui 3 minutit.

Kui olete seadet 20 minutit kasutanud, siis lülitage see välja, tõmmake pistik pesast välja ja laske seadmel jahtuda. Seade ei tohi saada märjaks.

Märkus

- Ärge kasutage massaažiseadet vahetult enne magamaminekut. Massaažil võib olla stimuleeriv mõju ning see võib unumist takistada.
- Seadmel on automaatne väljalülitusfunktsioon, mis aktiveerub, kui seadet on kasutatud 20 minutit järjest.



HOIATUS!

- Massaaž peab kogu aeg tunduma meeldiv ja lõõgastav. Kui tunnete valu või ebamugavustunnet, lülitage masseerimiseseade välja või muutke oma asendit.
- Ärge pange mis tahes kehaosa, eelkõige sõrmi massaažiotsaku piirkonda.

7. Hooldustööd ja hoiustamine

Puhastamine

Jahtunud ja vooluvõrgust lahti ühendatud seadet võib puhastada veidi niiske mikrokiudlapiga. Seejärel saate seade pehme, veidi niiske lapiga puhastada. Kasutada võib ka pehmetoimelist puhastusvahendit.



HOIATUS!

- Enne puhastamist tõmmake seadme pistik pesast välja.
- Puhastage seadet ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Vältige vedeliku sattumist seadme või selle tarvikute sisse.
- Ärge kasutage seadet, kui see ei ole täiesti kuiv.

Hoiustamine

Hoidke seade jahedas ja kuivas, lastele kättesaamatus kohas. Soovitame seadet hoida originaalpakendis.

8. Seadme töös ilmnedavad probleemid

Probleem	Põhjus	Lahendus
Masseerimispead ei pöörle.	Seade ei ole vooluvõrku ühendatud.	Ühendage seadme pistik pistikupessa ja lülitage seade sisse.
	Seade ei liigu.	Lülitage seade sisse.
	Ülekuumenemiskaitse aktiveerus.	Tõmmake pistik pesast välja, oodake vähemalt 15 minutit, ühendage pistik uuesti pessa ja lülitage seade sisse.

9. Tehnilised andmed

Mõõtmed (laius/kõrgus/sügavus)	~ 160/150/450 mm
Kaal	~ 1740 g
Väljundvõimsus	20 W
Nimipinge	220-240 V, ~ 50 Hz