

beurer

IPL 5500 Pure Skin Pro



LV Pure Skin Pro epilācijas sistēma
Lietošanas instrukcija..... 2



CE



Rūpīgi izlasiet lietošanas norādījumus un saglabājiēt tos turpmākai izmantošanai, pārliecinieties, ka tie ir pieejami citiem lietotājiem un ievērojiet tajos sniegto informāciju.

BRĪDINĀJUMS

- Ierīce un adapteris paredzēti lietošanai mājās/personīgai lietošanai un nav piemēroti komerciālai lietošanai.
- Šī ierīce ir piemērota tikai pieaugušajiem vecākiem par 18 gadiem.
- Bērniem ir aizliegts rotaļāties ar šo ierīci.
- Pārbaudiet, vai ierīce un strāvas kabelis ir nevainojamā darba kārtībā pirms katras lietošanas reizes. Bojājumu gadījumā ierīci ir aizliegts izmantot.
- Ierīce un adapteris nedrīkst saskarties ar mitrumu.
- Nelietojiet ierīci mitrā vidē, piemēram, vannas, izlietnes, dušas vai citu ūdenstilpņu vai šķidrumu tuvumā - pastāv strāvas trieciena briesmas!
- Nekad neskatieties uz gaismu.
- Neievietojiet priekšmetus ierīcē.
- Pārliecinieties, ka ierīces ventilācijas atveres nav aizsegtas.
- Lai novērstu strāvas trieciena iespēju, nepieskarieties iekšējiem komponentiem, ja ierīce ir bojāta.
- Ja ierīces strāvas kabelis ir bojāts, to nepieciešams utilizēt. Ja to nevar noņemt, ierīci nepieciešams utilizēt.

- Neļaujiet ierīcei darboties bez uzraudzības. Jānodrošina, ka bērni nevar rotaļāties ar šo ierīci.
- Nekādā gadījumā nemēģiniet atvērt vai remontēt ierīci saviem spēkiem, šādā gadījumā nav iespējams garantēt tās turpmāku pareizu darbību. Šīs instrukcijas neievērošanas

Labdien!

Paldies, ka izvēlējāties produktu no mūsu klāsta. Mūsu nosaukums liecina par augstu kvalitāti, rūpīgi pārbaudītiem produktiem siltuma ierīču, svara, asinsspiediena, ķermeņa temperatūras, pulsa, terapijas, masāžas, skaistumkopšanas un gaisa apstrādes ierīču nozarē.

Ar cieņu, Jūsu
Beurer komanda

Saturs

| | |
|--|-----------|
| 1. Iekļauts piegādē..... | 4 |
| 2. Apzīmējumi un simboli | 4 |
| 3. Paredzētais izmantojums | 5 |
| 4. Brīdinājumi un drošības norādījumi | 6 |
| 5. Ierīces apraksts | 11 |
| 6. Sākotnējā lietošana | 11 |
| 7. Lietojums | 13 |
| 7.1 Lietošanas metodes..... | 14 |
| 7.2 Īpaši norādījumi sejas epilācijai..... | 14 |
| 7.3 Lietošanas cikls | 16 |
| 7.4 Pēc ierīces lietošanas..... | 16 |
| 8. Tīrīšana un kopšana..... | 17 |
| 9. Ko darīt, ja radušās problēmas? | 17 |
| 10. Bieži uzdotie jautājumi | 17 |
| 11. Likvidācija | 20 |
| 12. Tehniskās specifikācijas..... | 20 |
| 13. Garantijas serviss..... | 21 |

1. Iekļauts piegādē

Pārbaudiet, vai ierīces iepakojums nav sabojāts, un pārlicinieties, vai tajā ir visas ierīces sastāvdaļas. Pirms lietošanas pārlicinieties, ka ierīcei vai piederumiem nav redzamu bojājumu un ka ir noņemts viss iepakojuma materiāls. Ja Jums ir kādas šaubas, nelietojiet ierīci un sazinieties ar mazumtirgotāju vai izmantojiet norādīto klientu apkalpošanas centra adresi.












1 x Pure Skin Pro epilācijas sistēma









1 x lietošanas instrukciju komplekts

1 x tīkla adapteris

2. Apzīmējumi un simboli

Šajā lietošanas instrukcijā, uz ierīces iepakojuma un tipa plāksnītes tiek izmantoti šādi simboli:

| | |
|---|---|
|  BRĪDINĀJUMS | Brīdinājums par traumas vai veselības kaitējuma risku |
|  SVARĪGI! | Drošības norādījums, kas liecina par iespējamu ierīces/piederuma bojājuma risku |
|  Piezīme: | Svarīga informācija |
|  BĪSTAMI | Šo ierīci aizliegts izmantot ūdenī vai ūdens tuvumā (piem., izlietne, duša vai vanna) - pastāv strāvas trieciena risks! |
|  | Ievērojiet lietošanas norādījumus |
|  | Ierīce ir dubulti aizsargāta un atbilst 2. aizsardzības klasei. |
|  | Izmantojiet tikai telpās |
|  | Pasargājiet no mitruma iedarbības |
|  | Uzmanību: optiskais starojums |
|  | Neturēt acu tuvumā! |
|  | Neizmantojiet uz iedegušas ādas vai pēc saules iedarbības. |

| | |
|--|---|
|  | Utilizācija jāveic saskaņā ar Direktīvu par elektrisko un elektronisko ierīču atkritumiem (WEEE). |
|  | CE markējums Šis produkts atbilst Eiropas un nacionālo direktīvu prasībām. |
|  | Produkti uzskatāmi atbilst EAEU tehnisko noteikumu prasībām. |
|  | Iznīciniet iepakojumu videi draudzīgā veidā |
|  Uzglabāšana / transportēšana | Pieļaujamā uzglabāšanas un transportēšanas temperatūra un mitrums |
|  | Līdzstrāvas savienotāja polaritāte |
|  | Energoefektivitātes klase: 6. |
|  | Līdzstrāva Ierīce ir piemērota lietošanai tikai ar līdzstrāvu |
|  | Ražotājs |

3. Paredzētais izmantojums

IPL Pure Skin Pro ir paredzēts nevēlama ķermeņa apmatojuma noņemšanai gan sievietēm, gan vīriešiem.

Ierīci paredzēts izmantot **kājām, padusēm, bikini zonā, uz krūtīm, vēdera, muguras un sejas zem vaigu kauliem (lietošanai uz sejas piemērots tikai sievietēm).**

Ierīci atļauts izmantot tikai paredzētajam lietošanas mērķim un lietošanas instrukcijā norādītajā veidā. Jebkāda nepareiza lietošana var būt bīstama. Ražotājs neuzņemas atbildību par kaitējumu, kas rodas neatbilstošas vai neuzmanīgas lietošanas rezultātā.

IPL tehnoloģija - kā tā darbojas

IPL Pure Skin Pro ir gaismas ierīce ilgstošai apmatojuma noņemšanai mājas apstākļos. Apmatojuma noņemšana ar gaismas impulsu palīdzību ir pazīstama un pierādīta metode. 15 gadu ilgi klīniski pētījumi visā pasaulē ir pierādījuši, ka tā ir droša un efektīva metode, kas ļauj panākt ilgstošu apmatojuma samazināšanos.

Kā gaisma noņem apmatojumu?

Uz gaismas iedarbību balstītās metodes pamatā ir selektīva fototermolīze, kas izmanto optisko enerģiju, lai pārtrauktu matiņu augšanu. Lai sasniegtu šādu termisko iedarbību, jāpanāk, ka mata sakne selektīvi absorbē gaismas enerģiju un pārvērs to siltumā.

Šo selektivitāti iespējams panākt, ja optisko enerģiju, kas tiek atbrīvota audos, galvenokārt absorbē matiņos esošais melanīna pigments. Gaismas enerģija tiek pārvērsta termiskajā enerģijā (siltumā), kas deaktivizē matiņu augšanu.

Kādu ietekmi uz apmatojuma noņemšanu ar gaismas palīdzību atstāj matiņu augšanas cikls.



Anagēnā jeb augšanas fāze



Katagēnā jeb pārejas fāze



Telogēnā jeb atpūtas fāze

Katrs matiņš uz mūsu ķermeņa iziet caur trim matu augšanas fāzēm - anagēno, katagēno un telogēno fāzi. IPL iedarbojas tikai uz matiņiem, kas atrodas anagēnajā jeb augšanas fāzē.

Lai gan pilna matu augšanas cikla garums ir atkarīgs no katra cilvēka un matu augšanas vietas uz ķermeņa, šis cikls parasti ilgst 18 līdz 24 mēnešus.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka pilnīgai apmatojuma noņemšanai ar Beurer IPL Pure Skin Pro palīdzību nepieciešams vismaz viens pilns apmatojuma augšanas cikls.



4. Brīdinājumi un drošības norādījumi



BRĪDINĀJUMS

Pirms ierīces izmantošanas, rūpīgi izlasiet drošības norādījumus un precīzi ievērojiet lietošanas instrukcijas. Šo norādījumu neievērošana var izraisīt traumas vai materiālu kaitējumu. Saglabājiet norādījumus turpmākai lietošanai un padariet tos pieejamus citiem lietotājiem.

- Šo ierīci atļauts izmantot personām ar ierobežotām fiziskajām, sensoriskajām vai garīgajām spējām, ar nosacījumu, ka lietošana notiek atbildīgas personas uzraudzībā, vai šādas personas ir sīki instruētas par ierīces lietošanu.
- Nelietojiet ierīci grūtniecības vai zīdīšanas laikā.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
- Ja āda ir ļoti sarkana, parādās čūlas vai apdegumi, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu!
- Nekad neskatieties tieši uz IPL lampas izstaroto gaismu.
- Nemēģiniet palaist gaismas pulsu gaisā!

- Atkarībā no "Matu un ādas krāsas tabulas" šīs instrukcijas pēdējā lapā, nosakiet, kāda gaismas intensitāte ir vislabāk piemērota Jūsu ādas un ķermeņa apmatojuma krāsai un vai šī metode vispār ir piemērota Jums (ja nē, tas tabulā atzīmēts ar "x").
- Neizmantojiet ierīci uz dabiski tumšas ādas.
- Nemēģiniet atvērt vai saremontēt ierīci. Ja ierīce tiek atvērta, Jūs varat saskarties ar bīstamiem elektriskajiem komponentiem vai gaismas enerģijas pulsu, kas var izraisīt smagus ievainojumus un/vai radīt nenovēršamus acu bojājumus.
- Nelietojiet ierīci kopā ar kontaktzēleju - tas var sabojāt ierīci.



Piezīme

Ierīce vislabāk iedarbojas uz tumšu apmatojumu vai matiņiem ar augstu melanīna saturu. Melni un tumši brūni matiņi reaģē vislabāk un, lai gan arī brūni un gaiši brūni matiņi reaģēs uz ierīces darbību, to noņemšanai parasti nepieciešamas vairākas sesijas. Ruds apmatojums var izraisīt reakciju. Balti, pelēki vai blondi matiņi parasti nereaģē uz šo ierīci, lai gan daži lietotāji pamanīja rezultātus pēc vairākām apmatojuma noņemšanas sesijām.

BĪSTAMI

Neturiet ierīci un adapteri ūdens tuvumā! IPL Pure Skin Pro ir elektriska ierīce. Neievietojiet to ūdenī un neļaujiet tai iekrist ūdenī vai citā šķidrumā.



Tas var radīt spēcīgu strāvas triecienu.

- Nelietojiet ierīci vannā.
- Nelietojiet ierīci, ja tā ir mitra vai slapja.
- Nepieskarieties ierīcei, ja tā iekritusi ūdenī.
- Nekavējoties atvienojiet strāvas adapteri, ja ierīce iekritusi ūdenī.
- Nepieskarieties strāvas adapterim vai ierīcei ar mitrām rokām!



BRĪDINĀJUMS

Nekādā gadījumā neizmantojiet šo ierīci, ja Jums ir kāda no šīm saslimšanām:

- Jums ir vai ir bijis ādas vēzis vai Jums veikta potenciālu ļaundabīgu ādas audzēju ārstēšana.
- Jums ir epilepsija vai jutība pret mirgojošām gaismām.
- Jums ir kolagēna saslimšanas, tostarp keloīdi vai pasliktināta audu dzīšana.
- Jums ir herpes vai psoriāze apstrādājamā vietā, izņemot, ja esat konsultējies ar ārstu un saņēmis profilaktisku ārstēšanu.
- Jums fotosensitivitāte vai cita veida jutība pret gaismu, piemēram, porfirija, polimorfiskā fotodermatoze, saules nātrene, vilkēde u.c.
- Jums ir vielmaiņas traucējumi, piemēram, diabēts.
- Jums ir asins recēšanas traucējumi.

Nekādā gadījumā neizmantojiet šo ierīci, ja lietojat kādus no šiem medikamentiem:

- Ja lietojat medikamentus, kas padara ādu jutīgāku pret gaismu, tostarp nesteroidos pretiekaisuma medikamentus (piemēram, aspirīnu, ibuprofēnu, paracetamolu), tetraciklīnu, fenotiazīnu, tiazīda diurētiķus, sulfonilureju, sulfonamīdu, DTIC, fluorouracilu, vinblastīnu, grizeofulvīnu, alfa hidroksi skābes (AHA), beta hidroksi skābes (BHA), Retin-A®, Accutane® un/vai topikāli lietojamus retionīdus.
- Ja Jums tiek veikta vai nesēn tikusi veikta ārstēšana ar azelaīnskābi.
- Ja esat lietojis steroīdu ārstēšanas kursu pēdējo trīs mēnešu laikā.
- Ja Jums veikta ādas pīlinga procedūra vai ādas nogludināšanas procedūra pēdējo sešu līdz astoņu nedēļu laikā.
- Ja Jums pēdējo trīs mēnešu laikā veikta starošanas vai ķīmijterapija.

Nekādā gadījumā neizmantojiet šo ierīci šādu vietu apstrādei:

- Deguna un rīkles gļotāda.
- Virs vai blakus aktīva implanta, piemēram, elektrokardiostimulatora vai nesaturēšanas kontroles ierīces, insulīna sūkņa u.c.
- Seja virs vaigu kauliem, ap acīm, uzacīm vai skropstām, jo tas var radīt smagus acu bojājumus.
- Uz krūšu galiem, areolām, kaunuma lūpām, vagīnas, anālās atveres, deguna un ausīm.
- Vīriešiem aizliegts izmantot šo ierīci uz sēkliniekiem vai sejas.
- Uz pīrsingiem vai citiem metāla priekšmetiem, piemēram, auskariem vai rotaslietām.
- Uz tetovējumiem vai permanentās kosmētikas apstrādājamā zonā.
- Uz tumši brūniem vai melniem plankumiem, piemēram, lieliem vasaras raibumiem, dzimumzīmēm, kārpām, čūlām.
- Uz ekzēmas, psoriāzes skartām vietām, ievainojumiem, vaļējām brūcēm vai akūtas infekcijas skartām vietām. Nogaidiet līdz skartā vieta sadzījusī, pirms izmantot ierīci.
- Uz bojātas vai saplaisājušas ādas, ja pastāv ļaundabīgu audzēju risks.
- Tādās ķermeņa vietās, kurās Jūs nākotnē varētu vēlēties apmatojumu.



Augstāk minētais saraksts nav izsmeļošs.

Ja lietojat recepšu medikamentus, atrodieties regulārā uzskaitē saslimšanas dēļ un/vai neesat pārliecināts, vai varat droši lietot šo ierīci, konsultējieties ar savu ārstu vai dermatologu pirms ierīces lietošanas.

Iespējamās blakusparādības:

Ja ierīce tiek izmantota saskaņā ar šiem norādījumiem, ar šīs ierīces lietošanu saistītas blakusparādības un komplikācijas parādās reti.

- Pēc procedūras ir iespējams, ka āda būs nedaudz sārta, niezosa vai silta. Šīs reakcijas ir nekaitīgas un ātri izzūd.
- Uz neilgu brīdi var rasties saules apdegumam līdzīga reakcija apstrādātajā vietā. Ja šī reakcija nepāriet trīs dienu laikā, konsultējieties ar ārstu.

- Skūšanās vai skūšanās un gaismas procedūras kombinācija var izraisīt ādas sausumu vai kairinājumu. Šī reakcija ir nekaitīga un izzūdīs pāris dienu laikā. Ja vēlaties, varat atdzēsēt skarto vietu ar ledu vai mitru drāniņu.
- Ja ādas sausums saglabājas, uzklājiet mitrinošu krēmu bez smaržvielām 24 stundas pēc procedūras.
- Retos gadījumos apstrādātā āda var kļūt ļoti sarkana un pietūkusi. Tas parasti saistīts ar to, ka izvēlēts pārāk augsts intensitātes līmenis, un šī reakcija ir biežāk sastopama uz jutīgākām ķermeņa daļām. Apsārtums un pietūkums parasti samazinās divu līdz septiņu dienu laikā un to vajadzētu ārstēt ar ledus kompresēm. Maiga mazgāšana ir atļauta, taču Jums vajadzētu izvairīties no saules iedarbības.
- Ādas krāsas izmaiņas ir ļoti retas, iespējami tumšāki vai gaišāki pleķi skartajā ādas zonā. Tie var rasties, ja izmantojat intensitātes līmeni, kas ir pārāk spēcīgs Jūsu ādas tonim. Ja krāsas izmaiņas nepazūd divu nedēļu laikā, konsultējieties ar ārstu. Neapstrādājiet vietas, kur mainījusies ādas krāsa, līdz krāsas izmaiņas ir pilnībā izzudušas.
- Ļoti retos gadījumos pēc procedūras var parādīties apdegumi vai ādas bojājumi. Apdegumi vai bojājumi sadzīst dažu nedēļu laikā un īpaši retos gadījumos Jums var palikt rēta.
- Ļoti retos gadījumos var rasties ādas infekcija un iekaisums. To var izraisīt ierīces lietošana uz brūcēm vai ādas bojājumiem, kas radušies skujoties, ādas traumām vai ieaugušiem matiņiem.
- Procedūras laikā vai pēc tās var parādīties asas sāpes šādos gadījumos: ja izmantojat ierīci uz neskūtas ādas; ja izvēlaties pārāk augstu intensitāti savam ādas tonim; ja apstrādājat vienu un to pašu ādas zonu ar gaismas pulsiem vairākas reizes; ja izmantojat ierīci uz vaļējām brūcēm, iekaisumiem, tetovējumiem, apdegumiem, u.t.t.
- Ļoti retos gadījumos var rasties pastāvīgas rētas. Rētas parasti ir plakanas un baltas. Lai uzlabotu rētas izskatu var būt nepieciešama turpmāka estētiska ārstēšana.
- Ļoti retos gadījumos ierīces izmantošana var izraisīt zilu/violetu asins izplūdumu, kas var saglabāties piecas līdz desmit dienas. Kad zilums ir izzudis, var rasties rūsgani brūnas krāsas pigmentācija (hiperpigmentācija), kas var būt pastāvīga.

Brīdinājums par sauļošanu pirms un pēc procedūras!

Sauļošanās pirms procedūras

1. Pēc sauļošanās nogaidiet vismaz 2 nedēļas pirms lietot ierīci.
2. Pirms procedūras, pārbaudiet, vai uz ādas nav saules apdegumu pazīmes. Ja Jums ir saules apdegumi, kas nav sadzijuši, nogaidiet līdz pilnīgai to sadzīšanai, pirms izmantot ierīci.
3. Veiciet ādas jutīguma testu uz iedegušas ādas, lai noteiktu pareizo procedūras intensitāti.



Sauļošanās pēc procedūras

1. Pēc procedūras nogaidiet vismaz 48 stundas pirms sauļošanās. Ja āda ir apsārtusi, nepakļaujiet to saules iedarbībai.
2. Pirmās divas nedēļas pēc procedūras, apstrādātā āda jāapsedz ar apģērbu vai pretiedeguma līdzekli (vismaz SPF 30), ja atrodaties saulē.

Mākslīgais iedegums

Norādījumi par sauļošanas pirms un pēc procedūras attiecas arī uz sauļošanas solārijā un mākslīgā iedeguma līdzekļu lietošanu.

Nelietojiet ierīci 24 stundas pirms pirts/peldbaseina apmeklējuma, jo hlors var radīt ādas kairinājumu.



SVARĪGI

Lai novērstu bojājumus

- Nemēģiniet atvērt vai saremontēt ierīci. Mēģinot atvērt ierīci, Jūs varat to sabojāt, kas padarīs garantiju spēkā neesošu.
- Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kamēr tā ir pieslēgta kontaktligzdai.
- Nedarbiniet ierīci, ja pati ierīce, tās vads vai kontaktdakša ir bojāta un turiet vadu tālāk no karstām virsmām.
- Vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla uzreiz pēc lietošanas.
- Neizmantojiet ierīci ar uzgaļiem vai piederumiem, ko nav rekomendējis Beurer GmbH.
- Lietošanas laikā nepakļaujiet ierīci temperatūrai, kas ir zemāka par 10°C vai augstāka par 35°C.
- Nelietojiet ierīci, ja lietošanas laikā parādās dūmi vai dūmu aromāts.
- Neizmantojiet ierīci, ja ierīces ventilatora atvere ir saplaisājusi, nokritusi vai pazudusi.
- Neizmantojiet ierīci, ja ierīces ādas krāsas sensors vai gaismas zona ir saplaisājusi vai bojāta.
- Nevērsiet gaismas pulsi pret citām virsmām, izņemot ādu. Pretējā gadījumā var rasties nopietni gaismas emisijas lodziņa vai ādas krāsas sensora bojājumi. Var rasties arī kaitējums apstarotajai virsmai. Aktivizējiet gaismas pulsu tikai vienu reizi, kad ierīce saskaras ar ādu.
- Pēc lietošanas, glabājiet ierīci oriģinālajā kastē.
- Nepakļaujiet ierīci ilgstošai tiešai saules staru vai UV gaismas iedarbībai, lai novērstu bojājumus.

5. Ierīces apraksts



| | |
|--|---------------------------------|
| 1. Gaismas zona | 5. Indikators |
| 2. Ādas krāsas sensors/ādas kontakta sensors | 6. Iedarbināšanas mēlīte |
| 3. Intensitātes displejs (3 līmeņi) | 7. Ierīces kontaktdakšas ligzda |
| 4. Ieslēgšanas/izslēgšanas/jaudas izvēles poga | |

Drošības ierīces

Ierīcei ir **ādas krāsas sensors**. Šis ādas krāsas sensors neļauj apstrādāt ādu, kas ir pārāk tumša vai pārāk iedegusi.

Ierīcei ir iebūvēts **UV filtrs**, kas bloķē kaitīgos UV starus.

Ierīcei ir iebūvēts **ādas kontakta sensors**, lai pasargātu acis. Sensors ir izstrādāts tā, lai gaismas pulsu nebūtu iespējams raidīt, kamēr ierīce ir pacelta gaisā. Gaismas impulss tiek izstarots tikai tad, kad ādas kontakta sensors pilnībā saskaras ar ādu.

6. Sākotnējā lietošana

Pirms sākat lietot ierīci, vispirms veiciet šos soļus:

1. Izmantojot matu un ādas krāsas tabulu (lietošanas instrukcijas pēdējā lapā), lai noteiktu piemērotu intensitātes līmeni. "x" tabulā norāda, ka ierīce nav piemērota Jums.
2. Pirms procedūras, noskujiet tās ķermeņa daļas, ko vēlaties apstrādāt. Izmantojiet skuvekli, nevis depilācijas krēmu.




3. Pārliecinieties, ka apstrādājami ādas laukumi ir noskūti, sausi un tīri (uz ādas nav pūdera, krēma, kosmētika vai dezodoranta atlikumi).



BRĪDINĀJUMS

Pirms ierīces lietošanas, neizmantojiet uzliesmojošus šķidrums, piemēram, alkoholu vai acetonu, lai notīrītu ādu.

4. Notīriet gaismas lodziņu un ādas kontakta sensoru ar sausu, neplūkošu drāniņu.

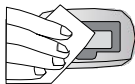

5. Veiciet ādas jutīguma pārbaudi katrai ķermeņa daļai, ko plānojat apstrādāt, **48 stundas** pirms procedūras.

Ādas jutīguma tests

1. Ievietojiet ierīces kontaktdakšu ierīcē un pievienojiet strāvas vadu elektrotīklam. Indikators gaismīņa sāk mirgot zaļā krāsā (gaidīšanas režīms).
2. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas/jaudas izvēles pogu. Intensitātes displejā iedegas zaļa gaismīņa (1. līmenis).

Piezīme

Veicot sejas ādas apstrādi, ādas jutīguma tests jāveic uz ādas bez apmatojuma, piemēram, zem auss vai kakla sānos.

3. Novietojiet gaismas zonu uz ādas un nospiediet mēlīti, lai iedarbinātu gaismas pulsu 1. līmenī.

Pārliecinieties, ka gaismas zona un ādas kontakta sensors pilnībā saskaras ar ādu. Gaismas impulsu iespējams iedarbināt tikai, ja ādas kontakta sensors pilnībā saskaras ar ādu. Jūs redzēsiet spilgtu gaismas uzliesmojumu, dzirdēsiet sprakšķošu skaņu un, iespējams, sajūtīsiet viegli dedzinošu sajūtu un/vai siltumu. Ierīce izslēdzas pēc pirmā impulsa. 1-3 sekunžu laikā (atkarībā no intensitātes līmeņa) ierīce ir gatava nākamajam pulsam un ierīces indikatora gaismīņa iedegas zaļā krāsā.

4. Novietojiet ādas saskares sensoru citā apstrādes vietā. Palieliniet intensitātes līmeni, vēlreiz nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas/jaudas izvēles pogu un iedarbiniet gaismas impulsu, nospiežot mēlīti. Nepārsniedziet maksimālo pieļaujamo/ieteicamo intensitāti atbilstoši Jūsu ādas tonim (skat. matu un ādas krāsas tabulu lietošanas instrukcijas pēdējā lapā).

i Piezīme

Palieliniet enerģijas līmeni tikai tad, ja iepriekšējais līmenis nerada Jums nepatīkamas sajūtas. Ja 1. līmenis sagādā nepatīkamas sajūtas, nepalieliniet



5. Ja pēc gaismas zibšņa rodas nepatīkama sajūta, samaziniet intensitāti.
6. Veiciet ādas jutīguma testu. Nogaidiet **48 stundas** un pārbaudiet apstrādāto vietu. Ja apstrādātā āda izskatās normāli (nav reakcijas vai viegls apsārtums), varat apstrādāt ādu, izmantojot tādu pašu intensitāti, ar kādu veicāt ādas jutīguma testu.

i Piezīme

Ja uz apstrādātās ādas parādās reakcija (piemēram, apsārtums vai pietūkums), nogaidiet līdz simptomi pilnībā pāriet un veiciet vēl vienu ādas jutīguma testu ar zemāku intensitāti. Ja joprojām parādās ādas reakcija, konsultējieties ar ārstu.

7. Lietojums

1. Ievietojiet ierīces kontaktdakšu ierīcē un pievienojiet strāvas vadu elektrotīklam. Indikatora gaismiņa sāk mirgot zaļā krāsā (gaidīšanas režīms).
2. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas/jaudas izvēles pogu. Intensitātes displejā iedegas zaļa gaismiņa (1. līmenis).
3. Ja vēlaties veikt procedūru augstākā intensitātes līmenī, palieliniet intensitāti vairākas reizes nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas/jaudas izvēles pogu līdz sasniegts vēlamais līmenis.
4. Novietojiet gaismas zonu uz ādas un nospiediet mēlīti, lai iedarbinātu gaismas impulsu. Pārliecinieties, ka gaismas zona un ādas kontakta sensors pilnībā saskaras ar ādu. Gaismas impulsu iespējams iedarbināt tikai, ja ādas kontakta sensors pilnībā saskaras ar ādu.
Jūs redzēsiet spilgtu gaismas uzliesmojumu, dzirdēsiet sprakšķošu skaņu un, iespējams, sajūties viegli dedzinošu sajūtu un/vai siltumu. Ierīce izslēdzas pēc pirmā impulsa. 1-3 sekunžu laikā (atkarībā no intensitātes līmeņa) ierīce ir gatava nākamajam pulsam un ierīces indikatora gaismiņa iedegas zaļā krāsā.

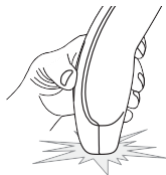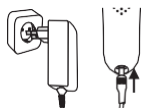

7.1 Lietošanas metodes



BRĪDINĀJUMS

Neapstrādāiet vienu ādas zonu vairākas reizes vienas procedūras ietvaros. Ja āda tiek apstrādāta vairāk nekā vienu reizi, pastāv lielāks blakusparādību rašanās risks.



Piezīme

Ādas laukuma apstrāde jāveic rindās - sāciet no viena rindas gala un turpiniet līdz otram galam. Šī tehnika ļauj labāk kontrolēt jau apstrādātos ādas laukumus un palīdz novērst atkārtotu viena ādas laukuma apstrādi vai apstrādāto laukumu pārklāšanās. Ierīces gaismas lodziņš ir izstrādātās tā, lai atstātu vieglu iespaidumu uz apstrādātā ādas laukuma. Šis redzamais iespaidums ļauj precīzi novietot nākamo pulsu.

1. lietošanas metode “Auto Flash”:

Turiet nospiestu ierīces mēlīti. Ierīce izstaro vairākus secīgus gaismas pulsus, kamēr vien ādas kontakta sensors ir saskarē ar ādu. Pēc trešā gaismas impulsa, kas tiek aktivizēts, turot nospiestu mēlīti, ierīce automātiski pārslēdzas uz “Auto Flash” režīmu. Ierīce automātiski regulāri izstaro gaismas impulsus. Šajā režīmā nav nepieciešams manuāli nospiegt mēlīti. “Auto Flash” režīms ir piemērots, lai apstrādātu lielākas ķermeņa daļas, piemēram, kājas.

2. apstrādes metode - “atsevišķi impulsi”:

Atļaidiet ierīces mēlīti pēc katra gaismas impulsa. Lai izstarotu nākamo impulsu, novietojiet ierīci tieši blakus tikko apstrādātajam laukumam. Pārliecinieties, ka gaismas zona un ādas kontakta sensors pilnībā saskaras ar ādu. Šis režīms ļauj panākt precīzu apstrādi, piemēram, ceļgaliem vai potītēm.



Piezīme

Ja ierīce nerada gaismas impulsus un indikatora gaismiņa ir **oranža**, tas liecina, ka ādas kontakta sensors nav pietiekami cieši piespiests ādai.

Ja ierīce nerada gaismas impulsus un indikatora gaismiņa ir **sarkana**, tas nozīmē, ka apstrādājamā ādas virsma ir pārāk tumša.



Piezīme

Ļaujiet ierīcei dažas minūtes atdzist, ja Jums šķiet, ka tā ir uzkarusī. Jūs varat turpināt procedūru kā ierasts, pēc īsa atdzišanas perioda.

7.2 Īpaši norādījumi sejas epilācijai



BRĪDINĀJUMS

- Vīriešiem aizliegts lietot šo ierīci sejas ādas apstrādei.

- Neizmantojiet ierīci uz sejas ar intensitāti, kas pārsniedz 2. līmeni. Neizmantojiet ierīci uz sejas virs vaigu kauliem, ap acīm, uzacīm vai skropstām, jo tas var radīt smagus acu bojājumus. Neizmantojiet ierīci uz deguna un rīkles gļotādām.
- Jūsu sejas āda ir īpaši maiga un prasa īpašas rūpes. Ievērojiet visus brīdinājumus un drošības norādījumus, kas iekļauti šajā instrukcijā, lai novērstu negatīvas sekas. Mēs iesakām vispirms veikt procedūru ķermenim, lai iepazītos ar ierīci, pirms veicat sejas ādas apstrādi. Ierīci var izmantot, lai apstrādātu sejas ādu zem vaigu kauliem, piemēram, augšlūpu, vaigus, žokli, zodu un kaklu.

1. Veiciet ādas jutīguma testu 48 stundas pirms apstrādes. Ādas jutīguma tests jāveic uz ādas bez apmatojuma, piemēram, zem auss vai kakla sānos, lai noteiktu piemērotu intensitātes līmeni.



BRĪDINĀJUMS

Neapstrādājiet ādas laukumu, kuram veicāt jutīguma testu, vismaz vienu nedēļu pēc jutīguma testa veikšanas.

2. Atzīmējiet apstrādāto laukumu ar baltu acu zīmuli. Ievērojiet šo līniju, apstrādājot pārējo ādu. Šādā veidā iespējams novērst nejaušu citu apstrādāto ādas laukumu pārklāšanos.
3. Izmantojiet spoguļi, lai pareizi novietotu ierīci uz apstrādājamā laukuma.
4. Ievērojiet lietošanas norādījumus un rūpīgi ievērojiet īpašos norādījumus.

Augšlūpas apstrāde

Novietojiet ierīci, kā redzams attēlā. Apstrādājiet katru atzīmēto zonu ar gaismas impulsu.

Izvairieties apstrādāt nāsis un lūpas, jo šīs zonas ir jutīgākas.



Piezīme

Varat mēģināt saspiest lūpas kopā, lai sasprindzinātu apstrādājamo zonu, vai uzklāt biezu kārtu balta acu zīmūļa uz lūpām un ap lūpu līniju. Baltā līnija nodrošina, ka zibšņa radītā enerģija tiek atstarota un nesasniedz Jūsu lūpas, pat ja impulss nejauši skar lūpas.

Vaigu un žokļa līnijas apstrāde

Novietojiet ierīci, kā redzams attēlā. Iedarbiniet impulsu katrā laukumā un virzieties no vienas vaiga vai žokļa puses uz otru.



Kakla un zoda apstrāde

Novietojiet ierīci, kā redzams attēlā. Iedarbiniet impulsu katrā laukumā un virzieties no vienas kakla vai zoda puses uz otru.



Kopšana pēc sejas procedūras

- Uzklājiet nomierinošu losjonu, kas satur, piemēram, alveju.
- Nelietojiet skrubi, balinošus losjonus vai līdzīgus produktus 24 stundas, jo tas var kairināt apstrādāto ādu.
- Vismaz 48 stundas pēc apstrādes, izvairieties atrasties tiešā saules gaismas ietekmē vairāk kā 15 minūtes. Ja apstrādātā āda tiek pakļauta saules iedarbībai šajā periodā, lietojiet aizsargkrēmu ar SPF 30 vai augstāku.
- Nenonēmiem apmatojumu apstrādātajā laukumā ar vasku vai pinceti.

Atcerieties, ka pilnīga apmatojuma noņemšana ir iespējama tikai pēc pilna matiņu augšanas cikla.

7.3 Lietošanas cikls

Ķermeņa apstrāde

- Pirmās trīs vai četras apmatojuma noņemšanas sesijas ar Beurer Pure Skin Pro System jāveic ar aptuveni divu nedēļu intervālu.
- Piektā līdz septītā apmatojuma noņemšanas sesija ar Beurer Pure Skin Pro System jāveic ar aptuveni četru nedēļu intervālu. Pēc tam varat izmantot Beurer Pure Skin Pro System periodiski, pēc nepieciešamības, līdz sasniegts noturīgs rezultāts.

Sejas apstrāde:

- Pirmās sešas apmatojuma noņemšanas sesijas ar Beurer Pure Skin Pro System jāveic ar aptuveni divu nedēļu intervālu.
- Septītā līdz divpadsmitā apmatojuma noņemšanas sesija ar Beurer Pure Skin Pro System jāveic ar aptuveni četru nedēļu intervālu. Pēc tam varat izmantot Beurer Pure Skin Pro System periodiski, pēc nepieciešamības, līdz sasniegts noturīgs rezultāts.

Tas atbilst ieteicamajam procedūru plānam, kas ļaus sasniegt vislabākos rezultātus. Taču Jūs varat izveidot personīgu procedūru plānu un tāpat sasniegt apmierinošus rezultātus.

7.4 Pēc ierīces lietošanas

1. Kad apmatojuma noņemšanas procedūra ir pabeigta, piespiediet un pieturiet ieslēgšanas/izslēgšanas/jaudas izvēles pogu 3 sekundes. Ierīce pāriet gaidīšanas režīmā, kad mazā, zaļā indikatora lampiņa nomirgo.
2. Atvienojiet strāvas adapteri no elektrotīkla.
3. Pēc katras apmatojuma noņemšanas sesijas ieteicams notīrīt ierīci, jo īpaši gaismas lodziņu.
4. Pēc tīrīšanas ieteicams uzglabāt ierīci tās oriģinālajā iepakojumā un neturēt to ūdens tuvumā.
5. Pēc procedūras neizmantojiet antiperspirantus/dezodorantus, jo tie var izraisīt kairinājumu.

8. Tīršana un kopšana


Pēc katras apmatojuma noņemšanas sesijas ieteicams notīrīt ierīci, pievēršot īpašu uzmanību gaismas lodziņam.

Tīrot ierīci, neizmantojiet šķīdinātājus vai citus kodīgus vai abrazīvus tīršanas līdzekļus, jo tie var bojāt ierīces virsmu.

Neieimērciet ierīci vai tās daļas ūdenī!

1. Pirms tīršanas, atvienojiet ierīces strāvas adapteri no kontaktligzdas.
2. Notīriet ierīces korpusu ar sausu, tīru drāniņu.

3. Maigi notīriet gaismas lodziņu un ādas kontakta sensoru ar viegli mitru, neplūkošu drāniņu.

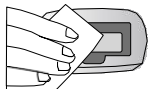

9. Ko darīt, ja radušās problēmas?

“Ierīci nevar ieslēgt”

- Pārliedzinieties, ka strāvas kabelis ir pareizi savienots ar ierīci.
- Pārliedzinieties, ka strāvas adapteris ir ievietots sienas kontaktligzdā.

“Piespiežot mēlīti, nerodas gaismas impulss”

- Pārliedzinieties, ka ierīce pilnībā saskaras ar ādu un gaismas lodziņš un ādas kontakta sensors ir vienmērīgi un cieši piespiesti ādai. Jūsu drošībai mēlīte aktivizē impulsu tikai tad, ja kontakta sensors pilnībā saskaras ar ādu.
- Ja ierīces indikatora lampiņa ir sarkana, tas nozīmē, ka Jūsu krāsa saskaņā ar ādas krāsas sensora mērījumiem ir pārāk tumša drošai ierīces lietošanai. Pārbaudiet ierīci uz citas ķermeņa daļas vai sazinieties ar Klientu apkalpošanas dienestu.
- Ja ierīces indikatora gaišmaņa ir oranža, tas nozīmē, ja ādas kontakta sensors nav pietiekami piespiests ādai. Piespiediet sensoru ciešāk ādai vai sazinieties ar Klientu apkalpošanas dienestu.
- Ja indikatora lampiņa pastāvīgi iedegas sarkanā krāsā, ir sasniegts maksimālais impulsa skaits.

10. Bieži uzdotie jautājumi

Vai ierīces tehnoloģija tiešām darbojas?

Jā. Ārstu veikti klīniskie pētījumi ir pierādījuši, ka Beurer Pure Skin System tehnoloģiju var izmantot, lai sasniegtu ilgstošus apmatojuma noņemšanas rezultātus.

Tomēr rezultāti var atšķirties atkarībā no matiņu augšanas cikla, izmantotā enerģijas līmeņa un matiņu biezuma un krāsas.

Cik ilgi ir viena procedūra?

Procedūras ilgums ir atkarīgs no apstrādājamās ķermeņa zonas. Visa ķermeņa apstrāde (kājas, rokas, paduses, bikini zona un seja zem vaigu kauliem) prasa aptuveni 20 minūtes zemākajā intensitātes līmenī. Tā kā ierīce tiek darbināta ar elektrību, varat to izmantot, cik ilgi vien nepieciešams, lai veiktu pilnu apmatojuma noņemšanas sesiju vēlamajā ķermeņa zonā.

Vai ierīce ir droša?

Ierīce ir izstrādāta, īpaši koncentrējoties uz Jūsu drošību, un ietver klīniski pārbaudītas tehnoloģijas. Tomēr šī ierīce - tāpat kā jebkurš cits produkts vai elektroniska ierīce, kas paredzēta izmantošanai uz ādas - jāizmanto saskaņā ar lietošanas norādījumiem un drošības norādījumiem.

Vai ierīces izmantošana ir sāpīga?

Ja tā tiek izmantota pareizi, lielākā daļa lietotāju norāda, ka gaismas impulss rada vieglu siltuma sajūtu. Lietotājiem ar biežāku un tumšāku apmatojumu var rasties nedaudz lielāks diskomforts, taču tas pāriet pēc apmatojuma noņemšanas sesijas beigām. Ierīcei ir trīs intensitātes līmeņi, ko varat izvēlēties atkarībā no ādas jutīguma.

Cik bieži vajadzētu izmantot ierīci?

Veicot ķermeņa apmatojuma noņemšanu, pirmās četras sesijas vajadzētu veikt ar divu nedēļu intervālu. Piekto līdz septīto sesiju var veikt ar četru nedēļu intervālu. Visas turpmākās sesijas vajadzētu veikt, ja matiņi ir atauguši, līdz sasniegts vēlamais rezultāts. Apstrādājot sejas ādu zem vaigu kauliem, pirmās sešas sesijas jāveic ar divu nedēļu intervālu. Septīto līdz divpadsmito sesiju var veikt ar četru nedēļu intervālu. Visas turpmākās sesijas vajadzētu veikt, ja matiņi ir atauguši, līdz sasniegts vēlamais rezultāts.

Vai ierīce iedarbojas uz baltiem, sirmiem vai blondiem matiņiem?

Ierīce vislabāk iedarbojas uz tumšu apmatojumu vai matiņiem ar augstu melanīna saturu. Melanīns ir pigments, kas piešķir matiem un ādai krāsu un absorbē gaismas enerģiju. Uz gaismas impulsiem vislabāk reaģē melni un tumši brūni matiņi. Gaismas impulsi iedarbojas arī uz brūniem un gaiši brūniem matiņiem, taču parasti tam nepieciešamas vairākas apmatojuma noņemšanas sesijas. Rudam apmatojumam novērojams ierobežots rezultāts. Balti, pelēki vai blondi matiņi parasti nereaģē uz šo ierīci, lai gan daži lietotāji pamanīja rezultātus pēc vairākām apmatojuma noņemšanas sesijām.

Vai ierīci var izmantot uz brūnas vai tumši brūnas ādas?

Ierīce nedarbojas, ja āda ir dabiski tumša. Ierīces pamatā ir gaismas tehnoloģija, kas ļauj noņemt nevēlamo apmatojumu, selektīvi iedarbojoties uz matu pigmentu. Apkārtējās ādas audu pigments ir atšķirīgs. Pigmenta daudzums katra cilvēka ādā - ko atspoguļo ādas krāsa - nosaka, cik lielu risku var radīt ierīces lietošana. Apstrādājot tumšu ādu, izmantojot uz gaismas tehnoloģiju balstītu apmatojuma noņemšanas ierīci, var rasties negatīvas sekas, piemēram, apdegumi, čūlas vai ādas krāsas izmaiņas (hiperpigmentācija vai hipopigmentācija). Ierīce ietver integrētu ādas krāsas sensoru, kas mēra apstrādājamās ādas krāsu pirms katra gaismas impulsa. Ādas krāsas sensors neļauj ierīcei radīt turpmākus impulsus, ja ierīce tiek lietota uz tumšākas ādas.

Kad sagaidāmi pamanāmi rezultāti?

Tāpat kā citu apmatojuma noņemšanas tehnoloģiju, kuru pamatā ir gaismas vai lāzera tehnoloģijas, gadījumā, rezultāti nav tūlītēji un Jums var rasties iespaids, ka nekas nav noticis. Pēc apmatojuma noņemšanas sesijas var šķist, ka matiņi ataug tāpat kā iepriekš, taču parasti lielākā daļa matiņu vienkārši izkrīt pēc divām nedēļām. Turklāt, apmatojums aug trīs dažādos posmos un ierīce iedarbojas tikai uz matiņiem aktīvās augšanas fāzē. Tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ nepieciešamas vairākas sesijas, lai sasniegtu vēlamu rezultātu.

Vai ierīce ir piemērota arī vīriešiem?

Vīriešiem aizliegts izmantot ierīci sejas apmatojuma apstrādei.

Lai gan šī ierīce ir izstrādāta sievietēm, to var izmantot arī vīrieši. Tomēr vīriešu apmatojuma - īpaši krūšu apmatojuma - noņemšanai nepieciešams vairāk sesiju nekā sievietēm, lai sasniegtu vēlamus rezultātus.

Kāpēc mans apmatojums turpina augt, lai gan es veicu procedūru pirms nedēļas?

Var likties, ka apmatojums turpina augt līdz pat divām nedēļām pēc apmatojuma noņemšanas sesijas, izmantojot šo ierīci. Tas ir pazīstams kā "izmešanas" process, pēc aptuveni divām nedēļām Jūs pamanīsiet, ka matiņi vienkārši izkrīt vai tos var izraut, viegli pavelkot. (Tomēr mēs neiesakām izraut matiņus - vienkārši ļaujiet tiem izkrist dabiski.) Tāpat ir iespējams, ka ierīce nav iedarbojusies uz dažiem matiņiem novietojuma kļūdas vai atšķirīgu augšanas posmu dēļ. Šie matiņi tiks apstrādāti nākamajās sesijās un tieši tādēļ ir nepieciešamas vairākas sesijas, lai sasniegtu labākos rezultātus ar šo ierīci.

Vai tā ir taisnība, ka daži matiņi ataug plānāki un smalkāki pēc apmatojuma noņemšanas ar gaismas ierīci?

Šo parādību plaši dokumentējuši gan skaistumkopšanas speciālisti, gan ārsti, kuri izmanto gaismas un lāzera ierīces apmatojuma noņemšanai. Ir iespējams, ka matiņi ataug plānāki un smalkāki pēc apmatojuma noņemšanas ar šo ierīci. Parasti šādi matiņi ir tikai daļa no sākotnējā apmatojuma daudzuma un tie tiks apstrādāti turpmāko sesiju laikā.

Kāpēc nevaru veikt procedūru, ja man ir iedegums?

Neizmantojiet ierīci uz iedegušas ādas vai pēc saules iedarbības. Iedegusi āda, īpaši pēc saskares ar saules gaismu, satur lielu daudzumu melanīna pigmenta. Tas attiecas uz visiem ādas tipiem un krāsām, arī ādu, kas šķietami neiedeg. Liels melanīna daudzums pakļauj ādu lielākam negatīvu blakusparādību riskam, tostarp apdegumiem, čūlām un ādas krāsas maiņas riskam (hiperpigmentācija vai hipopigmentācija).

Vai ierīces lietošana ilgtermiņā kaitē manai ādai?

Gaismas un lāzera tehnoloģijas skaistumkopšanā un medicīnā ir tikusi pētīta vairāk nekā 15 gadus, pētījumi tiek publicēti profesionālos žurnālos un tos pārbauda eksperti un atzītas institūcijas, piemēram, Mayo Clinic klīnika. Šajos žurnālos un iestāžu slēdzienos nav norādīts, ka gaismas un lāzera ierīču lietošana ilgtermiņā varētu radīt blakusparādības vai bojājumus.

Cik ilgi man jānogaida, lai varētu veikt procedūru, pēc atrašanās saulē, nelietojot saules aizsargkrēmu?

Jums jānogaida vismaz divas nedēļas pēc atrašanās saulē, pirms lietot šo ierīci. Ja joprojām neesat pārliecināta par saules iedarbību, konsultējieties ar savu ārstu.

Vai ir kādas īpašas darbības, kas man jāveic, pirms ierīces lietošanas?

Pirms katras procedūras, ir ļoti svarīgi izvairīties no saules iedarbības uz apstrādājamo virsmu vismaz divas nedēļas. Tas iespējams, lietojot UV saules aizsargkrēmu (SPF 30+) un apģērbu, kas nosedz apstrādājamo vietu. Tāpat Jums jānotīra apstrādājamā vieta ar maigām ziepēm un ūdeni un jānoskuj viss apmatojums.

Kā man jā rūpējas par ādu pēc procedūras?

Apstrādāto ādu var tīrīt un kopt ar komerciāli pieejamiem ādas kopšanas līdzekļiem. Ievērojiet īpašu piesardzību un pasargājiet ādu no saules iedarbības līdz 48 stundām pēc procedūras. Saules aizsargkrēms ar augstu SPF (30+) un apģērbs, kas nosedz apstrādāto vietu, nodrošinās pietiekamu aizsardzību no saules.

11. Likvidācija

Vides aizsardzības apsvērumu dēļ neizmetiet ierīci kopā ar sadzīves atkritumiem. Utilizējiet ierīci atbilstošā atkritumu savākšanas vai otreizējas pārstrādes punktā. Utilizācija jāveic saskaņā ar Direktīvu par elektrisko un elektronisko ierīču atkritumiem (WEEE). Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar vietējām par atkritumu apglabāšanu atbildīgajām iestādēm.






12. Tehniskās specifikācijas

| | |
|-----------------------------|--|
| Tips | IPL 5500 |
| Iedarbības laukums | 3.1 cm ² |
| Tehnoloģija | IPL (Intensīvs gaismas pulss - lietošanai mājās) |
| Viļņu garums | 475 – 1200 nm |
| Maks. enerģijas līmenis | Maks. 5 džouli/cm ² |
| Regulējami enerģijas līmeņi | 3 |
| Ātrums | 1 pulss ar intervālu: 1 sekunde 1. līmenī 2 sekundes 2. līmenī 3 sekundes 3. līmenī |
| Maks. gaismas pulsi | 200 000 |
| Izmēri | 16 x 6.5 x 5.5 cm |

| | | |
|--------------------|---------------|------------------------------------|
| Svars | Apt. 180 g | |
| Temperatūra | Ekspluatācija | 10 – 40 °C |
| | Uzglabāšana | -10 – 70 °C |
| Relatīvais mitrums | Ekspluatācija | 30 – 70% relatīvais mitrums |
| | Uzglabāšana | 0 – 90% pie 55 °C (bez kondensāta) |

Elektrotīkla daļa

| | |
|--------------------------------|--|
| Modeļa numurs | YJS024Y-1201800 |
| Ieeja | 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0.5 A |
| Izeja | 12.0 V  1.8 A, 21.6 W |
| Aizsardzības klase | Ierīce ir dubulti izolēta (II klase)  |
| Polaritāte |  |
| Vidējā aktīvā efektivitāte | ≥86.55 |
| Enerģijas patēriņš bez slodzes | ≤0,08 W |

Iespējamās tehniskas izmaiņas.

13. Garantijas serviss

Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Vācija (turpmāk tekstā - "Beuer") šim produktam nodrošina garantiju, ievērojot zemāk minētās prasības, un tālāk minētajā apmērā.

Zemāk minētie garantijas nosacījumi neietekmē pārdevēja likumā noteiktos garantijas pienākumus, kas izriet no pārdošanas līguma ar pircēju. Garantija tiek piemērota, neskarot obligātos likumos noteiktos atbildības noteikumus.

Beurer garantē šī produkta nevainojamu funkcionalitāti un pilnīgumu.

Visā pasaulē garantijas laiks ir 3 gadi, sākot no jauna, neizmantota produkta iegādes no pārdevēja.

Garantija attiecas tikai uz produktiem, ko pircējs iegādājies kā patērētājs un ko izmanto tikai personīgiem mērķiem mājās apstākļos.

Tiek piemēroti Vācijas tiesību aktu noteikumi.

Gadījumā, ja garantijas laikā izrādās, ka šis produkts ir nepilnīgs vai ar funkcionāliem trūkumiem saskaņā ar turpmāk minētajiem noteikumiem, Beurer veic remontu vai produkta aizstāšanu bez maksas saskaņā ar šiem garantijas nosacījumiem.

Ja pircējs vēlas iesniegt garantijas prasību, viņam vispirms jāsažinās ar vietējo mazumtirgotāju: skatiet pievienoto servisa adresi sarakstu “Starptautiskais serviss”.

Šeit pircējs saņems papildu informāciju par garantijas prasības apstrādi, piemēram, kur nosūtīt produktu un kāda dokumentācija ir nepieciešama.

Garantijas prasība tiek izskatīta tikai tad, ja pircējs var iesniegt Beurer vai pilnvarotam Beurer partnerim

- rēķina / pirkuma čeka kopiju un
- oriģinālo produktu.

Šī garantija neattiecas uz šādiem gadījumiem:

- nodilums normālas produkta lietošanas vai patēriņa rezultātā;
- kopā ar šo produktu piegādāto piederumu nolietojumā vai izlietošana pienācīgas lietošanas rezultātā (piemēram, baterijas, uzlādējamas baterijas, atloki, blīvslēgi, elektrodi, gaismas avoti, piederumi un smidzinātāja piederumi);
- produkti, kas tiek izmantoti, iztīrīti, uzglabāti vai apkopti nepareizi un / vai pretrunā ar lietošanas instrukcijas noteikumiem, kā arī produkti, kurus ir atvēris, salabojis vai pārveidojis pircējs vai Beurer neautorizēts servisa centrs;
- bojājumi, kas rodas transportēšanas laikā no ražotāja klientam vai no servisa centra klientam;
- produkti, kas iegādāti kā lietotas preces;
- izrietošie zaudējumi, kas radušies šī produkta darbības kļūdas dēļ (tomēr šajā gadījumā var rasties prasības, kas izriet no produktu atbildības vai citiem obligātiem tiesību aktos noteiktiem atbildības noteikumiem).

Remonts vai preces aizvietošana nekādā gadījumā nepagarina garantijas laiku.

Matu un ādas krāsu diagramma

| Ādas tips | I | II | III | IV | V | VI |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----|
| Mati | Energija | Energija | Energija | Energija | Energija | |
| Melni | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | ✗ |
| Tumši brūni | Energija | Energija | Energija | Energija | Energija | ✗ |
| Brūni | Energija | Energija | Energija | Energija | Energija | ✗ |
| Tumši blondi | Energija | Energija | Energija | Energija | Energija | ✗ |
| Gaiši blondi | Energija | Energija | Energija | Energija | Energija | ✗ |
| Rudi galva | Energija | Energija | Energija | Energija | Energija | ✗ |
| Sirmi/ balta | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |



EN *Intensitāte galvenokārt jāizvēlas atkarībā no komforta līmeņa.

** Jo augstāka intensitāte, jo efektīvāka būs procedūra.

Kūrmenis



Seja



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany •
www.beurer.com www.beurer-healthguide.com •

