


beurer

TB 30


CE

Elektriline hambahari
Kasustusjuhend


A

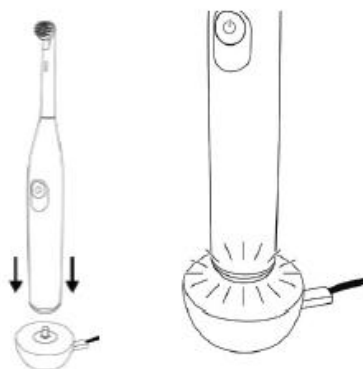


B

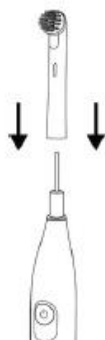


C

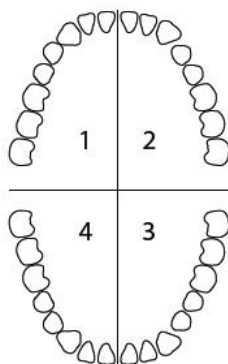

D

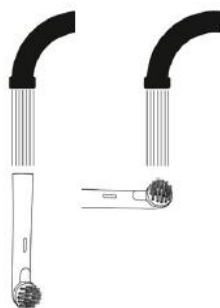

E

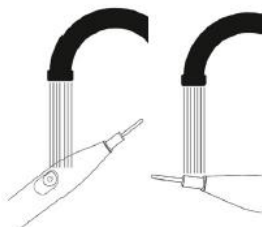



Lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult. Järgige hoiatusi ja ohutusmärkusi. Hoidke need juhised edaspidiseks alles.

Kasutusjuhend peab olema kõikidele kasutajatele kättesaadav. Kui annate seadme kellelegi teisele, andke sellega kaasa ka kasutusjuhend.

1. HOIATUSED JA OHUTUSMÄRKUSED

▲ WARNING

- Ärge asetage laadimisüksust ega toiteadapterit vette ega muusse vedelikku.
- Ärge asetage laadimisüksust ega toiteadapterit kraanikausi ega veega täidetud vanni lähedale.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused või oskused, tohivad seadet kasutada nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja vastavaid Seade ohutuseeskirju.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Ärge kasutage seadet, kui see on saanud kahjustada või kui seadmel on märke kahjustusest või seadme töös esineb tõrkeid. Sel juhul võtke ühendust klienditeenindusega.
- Kui toitejuhe läheb katki, tuleb laadija kasutuselt kõrvaldada.
- Kasutage USB-laadimisjuhet ainult koos toiteadapteriga ja seadmega kaasas oleva laadijaga.

- Ärge hoidke toiteadapteri välja tõmbamisel pistikupesast kinni juhtmest ega seadmest.
- Toiteadapteri tohib ühendada ainult sellele märgitud pingega vooluvõrku.
- Ärge võtke seadet koost lahti ega üritage seda ise remontida, sest vastasel juhul ei ole seadme nõuetekohane töö enam garanteeritud. Selle tingimuse rikkumisel kaotab seadme garantii kehtivuse.

Märkused akude kasutamise kohta

▲ WARNING

- Kui akuvedelik satub nahale või silma, peske neid põhjalikult puhta veega ning pöörduge viivitamatult arsti poole.
- Plahvatusoht! Ärge visake akusid tulle!
- Patarei lekkimise korral puhastage patareisahtel kuiva lapiga, kandes seejuures kaitsekindaid.
- Ärge võtke akusid osadeks lahti ega purustage neid.

▲ CAUTION

- Kaitske patareisid liigse kuumuse eest.
- Kasutage ainult selles kasutusjuhendis kindlaks määratud laadijat.
- Akud tuleb enne seadme kasutamist korralikult täis laadida. Alati tuleb järgida seadme tootja antud ja selles kasutusjuhendis kindlaks määratud laadimisjuhiseid.
- Laadige aku enne esimest kasutuskorda täielikult täis (vt „Kasutamiseks ettevalmistamine“).
- Aku võimalikult pika eluea tagamiseks laadige aku vähemalt kaks korda aastas täielikult täis.


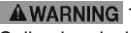


2. KOMPLEKTI KUULUB

Kontrollige, et pakend oleks kahjustamata ja et kõik vajalikud osad oleksid olemas. Enne seadme kasutamist kontrollige, et seadmel ega selle tarvikutel ei oleks nähtavaid kahjustusi ja et kogu pakkematerjal oleks eemaldatud. Kahtluste korral ärge seadet kasutage ja võtke ühendust seadme edasimüüja või klienditeenindusega (aadressi leiata kasutusjuhendist).








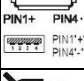




- Elektriline hambahari
- Harjapea
- Laadija
- USB-laadimisjuhe ja toiteadapter
- Selle kasutusjuhendi koopia

3. MÄRGID JA SÜMBOLID

Seadme ja tarvikute pakendil ja andmeplaadil kasutatakse järgmisi sümboleid:

| | |
|--|---|
|  | DANGER Tähistab võimalikku peatset ohtu. Selle eiramisel võite saada surma või raskelt vigastada. |
|  | WARNING Tähistab võimalikku peatset ohtu. Selle eiramisel võite saada surma või raskelt vigastada. |
|  | CAUTION Tähistab võimalikku peatset ohtu. Selle eiramisel võib tulemus olla kerge või väiksem vigastus. |
|  | NOTICE Tähistab võimalikku kahjulikku olukorda. Selle eiramisel võib seade või selle lähedal asuvad esemed saada kahjustada. |


| | |
|---|--|
|  | Tooteteave Tähtis teave. |
|  | Lugege kasutusjuhiseid. |
|  | Seade tuleb kasutuselt kõrvaldada vastavalt EÜ WEEE-direktiivile (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmete direktiiv) |
|  | Ärge visake ohtlikke jäätmeid sisaldavaid patareisisid olmejäätmete hulka. Pb Cd Hg |
|  | Tooted vastavad EAEU tehniliste eeskirjade nõuetele |
|  | Sorteerige pakendi osad ja kõrvaldage need kasutuselt vastavalt kohalikele eeskirjadele. |
|  | CE-märgistus Toode vastab kehtivatele Euroopa ja riigisisestele direktiividele |
|  | Sorteerige toode ja pakendi osad ja kõrvaldage need kasutuselt vastavalt kohalikele eeskirjadele. |
|  | Pakendimaterjali identifitseerimise tähis A = materjali lühend, B = materjali number: 1-7 = plast, 20-22 = paber ja papp |

| | |
|---|---|
|  | Nõuetekohasuse hinnang Ühendkuningriigile |
|  | Kaitseklassi III seade |
|  | Importija sümbol |
|  | Tootja |
|  | Tähistab kaitset veepritsmete vastu |
| ta=40°C | Ümbritseva keskkonna temperatuur |
|  | Toiteadapter, lülitusrežiim; lülitusrežiimiga toiteadapter; SMPS |
|  | Turvaisolatsiooniga muundur; lühisekaitse |
|  | USB/ Micro-USB ühendus |
|  | Kui pistik on kahjustada saanud, siis ärge toiteadapterit kasutage. |
|  | Energiaühenduse klass 6 |
|  | Kaitseklass II Seadmel on kahekordne kaitsev isolatsioonikiht ja seetõttu vastab see II kaitseklassi seadmetele esitatavatele nõuetele. |
|  | Kasutamiseks ainult siseruumides |

4. KASUTUSEESMÄRK

Kasutage seadet ainult inimeste hammaste puhastamiseks. Ärge kasutage seda seadet loomadell! Seade ei sobi kasutamiseks alla 8-aastastele lastele. Seadet tohib kasutada ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud eesmärgil. Tootja ei võta endale vastutust seadme sobimatust või hooletust kasutamisest tuleneva kahju eest.

5. SEADME KIRJELDUS

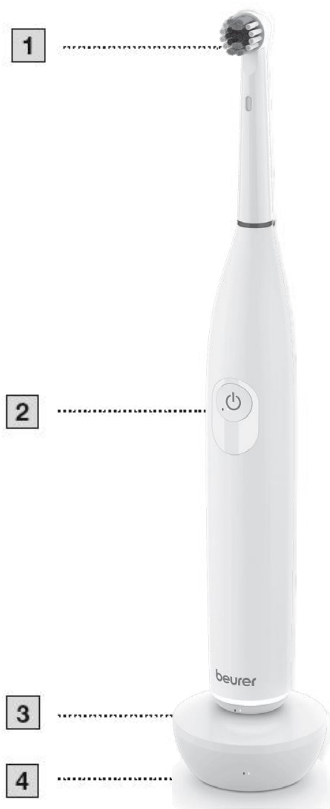

1 Harjapea

2 Sisse-välja lülitamise / režiimi nupp

Korraks vajutamine: Seadme sisse-välja lülitamine
All hoidmine: režiimi vahetamine

3 Valgusrõngas

Laadimistaseme näidik

Valgusrõngas vilgub valgena: aku tühjeneb
Valgusrõngas pulseerib valgena: aku laadimine

Valgusrõngas põleb püsivalt valgena: aku on laetud

4 Laadimisalus

6. KASUTAMINE

6.1 Kasutamiseks ettevalmistamine

Elektrilise hambaharja laadimine

Enne esimest kasutuskorda laadige seade täiesti täis. Selleks toimige alljärgnevalt:

1. Ühendage USB-laadimisjuhe laadimisaluslega
4. Ühendage USB-laadimisjuhe USB-porti või

sobivasse pesa, kasutades kaasasolevat adapterit.

2. Asetage seade laadimisalusle **4**. Laadimise ajal pulseerib valgusrõngas **3** valgena (vt joonis **A**). Laadimise lõppedes jääb valgusrõngas **3** püsivalt valgena põlema.

Harjapea paigaldamine

Asetage harjapea **1** ülevalt seadmele, nii et see lukustub klõpsuga oma kohale. **B** Veenduge, et harjapea **1** on samas suunas kui sisse-välja lülitamise / režiimi nupp **2**.



Soovitame vahetada harjapead **1** iga 3 kuu järel. Kui harjapea harjased on kulunud, võib harjapead vahetada varem.

6.2 Kasutamise alustamine

1. Seadme sisse lülitamiseks vajutage korraks sisse-välja lülitamise / režiimi nuppu **2**. Elektriline hambahari vibreerib iga 30 sekundi tagant tuletamaks meelde, et kõiki suu nelja sektorit tuleb puhastada ühekaupa. Elektrilisel hambaharjal on automaatne taimer ja see vibreerib 3 korda iga 2 minuti tagant. Seade lülitub automaatselt välja 6 minuti pärast.
2. Soovitud režiimi saate valida sisse-välja lülitamise / režiimi nupust **2**. Saadaval on järgmised režiimid:

| | |
|---------------|--|
| "puhastamine" | Põhjalik puhastamine |
| "tundlik" | Õrnaks ja igemesõbralikuks puhastamiseks |

3. Seadme kasutamise enneaegselt lõpetamiseks vajutage korraks sisse-välja lülitamise / režiimi nuppu **2**.
4. Puhastage seade, järgides juhiseid peatükis „Puhastamine ja hooldustööd“.

7. PUHASTAMINE JA HOOLDUSTÖÖD

Puhastage seadet ja harjapead **1** pärast igat kasutuskorda.

Selleks toimige alljärgnevalt:

1. Tõmmake harjapead **1** üles ja välja.
2. Puhastage harjapead **1** voolava vee all **D**. Puhastage harjapead **1** ka seestpoolt.
3. Puhastage seadet voolava vee **E**. Ärge asetage seadet vette. Vesi võib sattuda seadmesse ja seda kahjustada.
4. Puhastage laadimisalus **4** regulaarselt niiske lapiga ja leebetoimelise seebi lahusega. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusaineid. Hoidke laadimisalus **4** ja USB-laadimisjuhe koos toiteadapteriga veest eemal.

8. TARVIKUD JA VARUOSAD

Tarvikute ja varuosade ostmiseks külastage www.beurer.com või pöörduge oma riigi teeninduskeskusesse (aadressid leiata nimekirjast). Tarvikuid ja varuosid saate osta edasimüüjate käest.

| Otstarve | Toote number ja/või tellimis-number |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Harjapead Clean 4 tk. | 101.56 |
| Harjapead Clean 8 tk. | 101.54 |
| Harjapead Sensitive 4 tk. | 101.58 |
| Harjapead Sensitive 8 tk. | 101.39 |

9. KASUTUSELT KÕRVALDAMINE



Keskonnakaitse tagamiseks ärge visake kasutuskõlbatuks muutunud seadmeid olmeprügi hulka. Viige töökõlbatuks muutunud seade vastavasse kogumis- või ümbertöötlemiskeskusesse. Järgige vastavaid kohalikke eeskirju. Seadmete kasutusest kõrvaldamisel tuleb järgida EÜ WEEE (elektrilised ja elektroonilised jäätmed) sätestatud nõudeid. Küsimuste korral võtke ühendust jäätmekäitluse eest vastutava kohaliku asutusega. Teavet kogumispunktide kohta teie piirkonnas saate kohalikust omavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või seadme müüjalt. Tühjad akud tuleb viia vastavasse kogumispunkti. Teil on seadusjärgne kohustus akudest ohutult vabaneda. Ohtlikke aineid sisaldavatele akudele on trükitud järgmised koodid:

Pb = sisaldab pliid,
Cd = patarei sisaldab kaadmiumi.
Hg = patarei sisaldab elavhõbedat



Aku eemaldamine

1. Eemaldage seadme põhjas asuv kummitihend teravaotsalise esemega.
2. Eemaldage ümbris teravaotsalise esemega.
3. Eemaldage nähtavale ilmunud kruvi sobiva kruvikeerajaga.
4. Eemaldage seadme põhi.
5. Tõmmake sisekorpus seadmest välja.
6. Võtke akud korpusest välja.
7. Tühjad akud tuleb viia vastavasse kogumispunkti.

10. TEHNILISED ANDMED

| | |
|----------------|--|
| Tüüp | TB 50 |
| Mõõtmed | Seade: 205 x 29 mm Hoiukarp: 213 x 57 x 34 mm |
| Kaal | Seade: 214 g (hambahari + harjapea + laadija) Hoiukarp sh tarvikud: 224 g |
| Aku: | |
| Mahutavus | 1500 mAh |
| Nimipinge | 3,7 V |
| Tüübimääratlus | Liitiumioonaku |
| Toiteallikas | Sisend: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,2 A Väljund: 5,0 V = 1,0 A, 5,0 W |

Toodet võidakse tehniliselt muuta.

11. GARANTII

Lisateavet garantiitingimuste kohta saate kaasasolevalt garantiilehelt.

Hooldustöökoda: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renerk.ee,
Avatud E-R 9:00-18:00

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918